

WI-912

IRRIGADOR BUCAL



ES Instrucciones de funcionamiento

Gracias por comprar el irrigador bucal WI-912 de B.Well. Este dispositivo es útil para limpiar los espacios interdentales y eliminar la placa de manera eficaz. Evita la aparición de sarro dental y es perfecto para la prevención de caries y enfermedades periodontales. El irrigador bucal WI-912 es una pequeña unidad para el cuidado bucal en caso de que tenga puentes, implantes, coronas o aparatos de ortodoncia.

También puede utilizarse para masajear las encías, lo que mejora la circulación sanguínea y promueve la cicatrización gingival. Tres modos de funcionamiento aseguran la máxima eficacia de la unidad.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

(i) ADVERTENCIA

Nunca utilice las soluciones siguientes para irrigación bucal: Sustancias y soluciones que contengan partículas suspendidas (decocciones,

- suspensiones, infusiones, etc.). Tales partículas pueden obstruir el tubo de succión y la boquilla. Soluciones oleosas. El aceite es un disolvente orgánico cuyo uso puede tener un efecto corrosivo en el tubo de succión y los componentes del dispositivo. Soluciones oleosas. El aceite es un disolvente orgánico cuyo uso puede tener un
- efecto corrosivo en el tubo de succión y los componentes del dispositivo Soluciones antisépticas (permanganato de potasio, miramistina y otros
- fármacos antisépticos).
- Soluciones de enjuague bucal corrientes. Soluciones salinas, pasta de dientes o sustancias químicas.
- Permitidas para irrigación bucal:

Agua limpia (hasta 40 °C). Utilice agua filtrada si la calidad del agua corriente en su zona es mala

- Enjuagues especiales para su uso con el irrigador (siempre mezclados con agua en una proporción definida. Para conocer las proporciones recomendadas
- consulte las instrucciones del fabricante del enjuague). i PRECAUCIÓN Si se utilizan soluciones especiales para el irrigador, asegúrese de limpiar el dispositivo con agua dulce después de utilizarlo:
- rellene el depósito de agua con agua y ejecute un ciclo de irrigación vaciando el dispositivo en el desagüe. Preste especial atención a la fecha de caducidad de las soluciones permitidas. No utilice soluciones caducadas El dispositivo cuenta con baterías integradas. No exponga la unidad al fuego ni al calor, no la cargue, utilice o deje en sitios con una temperatura del aire

- No utilice el cargador de inducción con el enchufe o el cable dañados ⚠ PRECAUCIONES:
- No deje ni guarde el dispositivo y el cargador sin contacto donde puedan caerse a una bañera, lavabo o váter. Esto podría provocar una descarga eléctrica o un
- No sumerja el irrigador en agua. No utilice el dispositivo si el cargador o el cable de alimentación están
- dañados o conectados de manera incorrecta. Esto podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. El fabricante o un técnico de mantenimiento cualificado deberán sustituirlo. No rompa, doble, retuerza ni tire del cable de alimentación ni aplique demasiada fuerza sobre el mismo. Sobre todo no coloque objetos pesados
- sobre el cable de alimentación y no coloque el cable de alimentación entre tales objetos. Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. No sumerja el cargador sin contacto en agua ni lo lave con agua. Podría
- provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito. No enchufe ni desenchufe el cargador sin contacto de la toma de corriente con las manos mojadas. Podría provocar una descarga eléctrica. Mantenga el dispositivo alejado del alcance de los niños. El incumplimiento de
- esta norma puede provocar accidentes y situaciones peligrosas, por ejemplo, la ingestión accidental de los accesorios o las piezas desmontables de la unidad Limpie regularmente el cargador sin contacto para que no acumule polvo. El incumplimiento de esta medida de precaución puede provocar un incendio debido a un fallo del aislamiento a causa de la humedad y la acumulación de
- Compruebe siempre que el cargador sin contacto esté conectado a la toma de corriente con la tensión nominal adecuada. El incumplimiento puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. No desmonte ni repare el instrumento usted mismo. Podría lesionarse o
- provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para las reparaciones (como las sustituciones de la batería) póngase en contacto con el Centro de atención y servicio técnico de B.Well.
- No guarde la unidad donde pueda caerse y romperse en varios pedazos (por ejemplo, sobre un lavabo).
- No utilice el dispositivo con boquillas sueltas **△** ADVERTENCIA:
- Los niños y las personas que no puedan utilizar el dispositivo de manera independiente, así como las personas con una sensibilidad bucal debilitada, no

- deberán usarlo. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar lesiones en el usuario. Los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento podrán utilizar este dispositivo si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del mismo de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Utilice el dispositivo exclusivamente para la limpieza de la boca. El chorro de agua a alta presión puede provocar lesiones graves si se dirige hacia los ojos, la nariz, los oídos o la garganta. Consulte a su dentista antes de utilizar el dispositivo para
- el tratamiento de la boca o si padece alguna enfermedad periodontal grave. Las personas con dolor de muelas o gingival no deberán utilizar el irrigador bajo ninguna circunstancia. Consulte a su dentista Durante el uso, no presione la boquilla contra los dientes ni las encías, ya que
- podría hacerse daño. . No utilice agua por encima de los 40 °C de temperatura para llenar el depósito.
- Cuando desconecte el cargador sin contacto de una toma de corriente, agárrelo siempre por el enchufe, no por el cable. El incumplimiento puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.

 Mantenga el dispositivo limpio, y utilice solo agua corriente para la limpieza bucal. Algunos tipos de líquidos pueden dañar el dispositivo. Por este motivo, no utilice

Después de utilizar el dispositivo asegúrese de vaciar el agua restante del

líquidos incluidos en la lista de líquidos prohibidos para la irrigación.

- depósito y a continuación encienda el dispositivo durante 2-3 segundos para vaciarlo por completo. En caso de no cumplir con las normas sanitarias de uso del dispositivo, puede desarrollarse el crecimiento de hongos y bacterias, lo que podría ser perjudicial para la salud. También podría provocar olores
- desagradables y un mal funcionamiento. 2. USO PREVISTO El irrigador bucal WI-912 con accesorios está diseñado para: Un cuidado completo y una ayuda para la higiene de la cavidad bucal y los espacios interdentales. El cuidado de la boca en personas con puentes, implantes, coronas o aparatos

de ortodoncia

- La limpieza y el masaje de las encías. Está previsto para un uso privado.
- Contraindicaciones:
- Antes de utilizar el irrigador se recomienda consultar a un dentista en caso de intervención quirúrgica bucal o fase de empeoramiento de una enfermedad bucal crónica
- Durante los primeros usos del irrigador puede producirse un sangrado gingival En el caso de las encías sanas, el sangrado debería parar en las dos primeras semanas

Si después de 2 semanas aún le sangran las encías, deje de utilizar el irrigador y

3. ELEMENTOS INCLUIDOS Irrigador bucal WI-912. Contenido incluido en la entrega:

1. Irrigador bucal 2 boquillas estándar 3. 1 boquilla ortodóntica

1 boquilla para la limpieza de la lengua


consulte a su dentista

- 1 boquilla periodontal (para las encías) 3. Depósito de agua de 150 ml 1 filtro
- 8. 1 tubo de succión 9. Juego de fijación a la pared (juego de tornillos y tacos de pared)
- 11. 1 cargador sin contacto 12. 1 manual del usuario

Boquilla ESTÁNDAR para el irrigador WI-912

- 13. 1 tarjeta de garantía 14. 1 caja (i) Nota: Puede haber humedad dentro del depósito de agua o el tubo de succión
- en el momento de la compra. Esta humedad es producto del agua destilada utilizada para probar el producto y es segura para las personas
- Accesorios del irrigador WI-912 de B.Well (vendidos por separado): Juegos de boquillas:

Diseñada para la limpieza de los espacios interdentales contra bacterias y partículas de comida. El periodo de uso recomendado hasta la sustitución es de

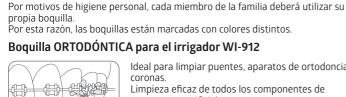

⚠ IMPORTANTE:



Ideal para limpiar puentes, aparatos de ortodoncia y Limpieza eficaz de todos los componentes de

Adecuada para la limpieza diaria de la lengua. Elimina la placa bacteriana y refresca el aliento. El periodo de uso recomendado hasta la sustitución

es de 6 meses.

Boquilla de LIMPIEZA DE LA LENGUA para el irrigador WI-912




de para limpiar las superficies bajo las prótesis y los puentes dentales. El periodo de uso recomendado hasta la sustitución es de 6 meses.

Boquilla

Anilla de identificación

4. PREPARAR EL IRRIGADOR PARA SU FUNCIONAMIENTO

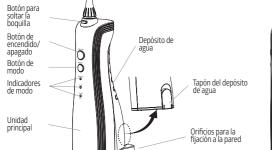

Filtro Pulse el botón de encendido/apagado para encender y apagar el dispositivo. Pulse el botón de modo para elegir el modo de chorro de agua deseado (normal, suave, pulsos). El modo seleccionado se mostrará en el indicador de modo. Si desea utilizar un modo distinto, pulse el botón de modo hasta que cambie a la configuración deseada. Pulsar el botón de modo cambiará los modos entre normal, suave y pulsos.

Modo y su indicador 1. Botón de modo (pulsarlo cambiará la configuración del chorro de agua e iluminará el indicador de modo correspondiente).

2. Normal: limpieza bucal eficaz.

- 3. Suave: limpieza delicada para dientes y encías
- 4. Pulsos: limpieza y masaje de las encías. (i) Nota: Cuando utilice el dispositivo por primera vez, pulse el botón de encendido/ apagado para encenderlo y pruebe cada uno de los modos de chorro de agua con el depósito lleno de agua.

5. FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO A LA **PARED**

En caso necesario, el irrigador puede fijarse a la pared. Se incluye el juego de tornillos y tacos Los orificios de montaje están úbicados en la parte trasera

Mida la distancia entre los orificios y coloque los tacos y

- los tornillos en los puntos marcados en la pared Acople el cargador a los tornillos colocados en la pared.
- Compruebe que la fijación a la pared sea segura.
- 6. CARGA DEL DISPOSITIVO

Conecte el cargador sin contacto a la corriente.

- Coloque el irrigador en el cargador sin contacto.
- El indicador «ČH» parpadea durante la carga del irrigador. Cuando el irrigador se haya cargado por completo, el indicador «CH» se quedará iluminado. 4. Cuando se complete la carga, desenchufe el cargador sin contacto de la corriente.
- (i) Nota: Si el indicador «CH» parpadea durante y después del procedimiento, significa que se necesita
- cargar la batería del irrigador. Se tardan aproximadamente 24 horas en cargar la batería 📗 por completo.

7. USO DEL DISPOSITIVO Acople la boquilla en el hueco correspondiente de la unidad principal. Para sacar la boquilla, pulse el

- botón para soltar la boquilla y tire de ella hacia arriba. Llene el depósito con agua utilizando cualquiera de los métodos siguientes:







Utilice siempre agua corriente. No vierta las soluciones de la lista de soluciones prohibidas, especificada al

- esté apagado cuando el depósito se esté llenando con agua.
- restante después su uso. Utilizar el dispositivo sin agua puede provocar un mal Antes de encender el dispositivo, colóquese la boquilla del irrigador en la
- el tratamiento desde la parte posterior de la boca, deteniéndose en los espacios interdentales para una mejor desinfección. Continúe hasta que todas las zonas alrededor y entre los dientes estén limpias. Si coloca el dispositivo bocabajo se detendrá la succión del agua desde el depósito. Para evitar las salpicaduras, cúbrase la boca ligeramente durante la irrigación. 6. El dispositivo empieza a funcionar en el modo elegido previamente. Para cambiar el modo de funcionamiento pulse el botón de selección de modo. El tiempo de funcionamiento del dispositivo con el depósito de agua
- completamente lleno varía entre 40 y 100 segundos en función del modo de funcionamiento seleccionado. Mantenga la boca ligeramente abierta para que el agua pueda salir de ella. Dirija el chorro lo más perpendicularmente posible hacia el espacio interdental o las uniones dentogingivales. Mueva el dispositivo lentamente a lo largo del arco dental. Preste especial atención a la limpieza del espacio interdental y la zona alrededor
- zona molar (dientes posteriores) y avance lentamente hacia los dientes anteriores. Mueva el dispositivo a lo largo de las encías, pero deténgase en los espacios interdentales. Continúe hasta que todas las zonas <u>a</u>lrededor de los dientes estén completamente limpias. Recuerde que la irrigación bucal no sustituye a COOPPOOL
- Para un uso más sencillo puede rotar el accesorio en un ángulo de 360° alrededor del eje 8. DESPUÉS DEL USO
 - del depósito del tanque o desacople el depósito y vacíelo de agua.

drenar el agua restante. 3. Limpie el irrigador con un paño seco. (i) NOTA:

Sin desacoplar la boquilla

2. Encienda el dispositivo

del irrigador, retire el tapón



Apague el dispositivo y desacople el depósito del agua y la boquilla. No utilice agua por encima de 50 °C para lavar el dispositivo.

Utilice un trozo de tela para limpiar la unidad principal. Utilice jabón líquido o agua para eliminar la suciedad difícil de retirar. . Utilice solo detergentes con pH neutro. No utilice sosa cáustica ni sustancias

abrasivas (por ejemplo, vinagre o disolventes calcáreos), ya que podría dañar el . No sumerja la unidad principal en agua.

enjuagarse siempre después de cada uso. Para este propósito, llene el depósito de agua con agua templada y encienda el dispositivo, dirija el accesorio del irrigador hacia abajo de manera que apunte hacia el desagüe y seque el

Utilice solo un detergente de pH neutro para la limpieza. Boquilla Lave las boquillas con agua después de cada uso.

Acaba de comprar el accesorio o no lo

ha utilizado en los últimos 3 meses

La batería no está cargada lo

La vida útil de la batería está a punto

Solución

24 horas

Cargue la batería durante

Póngase en contacto con el

Cargue la batería durante 24 horas

centro de servicio

10. POSIBLES PROBLEMAS Problema

El agua no sale por la	La boquilla está deformada	Sustituya la boquilla	
boguilla	El filtro está bloqueado	Limpie el filtro	
	La batería no está cargada lo suficiente	Cargue la batería durante 24 horas	
Water does not come from	El depósito del agua está vacío	Llene el depósito de agua	
nozzle	Posición incorrecta del dispositivo	Utilice la unidad principal en posición vertical	
Asegúrese de retirar la	EL DISPOSITIVO Y LA BA batería cuando termine la vida protegerse las manos y los ojo	útil del dispositivo y antes	
Asegúrese de retirar la de eliminarlo. No olvide Elimine la batería por se dudas relacionadas con		útil del dispositivo y antes is para retirar la batería. La principal. En caso de inidad electrónica, póngase	

dispositivo de acuerdo con las normas aplicables en lugar de eliminarlo como un

≈24 horas

Li-ion, CC 3,7 V

≈60 minutos

hasta 500 ciclos (carga/descarga)

Inductive charging (No adaptor)

Modo de funcionamiento «Normal»: entre 40 y 60 s

Cargador sin contacto – 176 g Unidad principal – 282 g

Cargador sin contacto: 100-240 V, 50/60 Hz Consumo de energía: 0.7-1.7 W Dimensiones (Ancho × Largo × Alto) 56 × 79 × 195 mm

12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

depósito lle	no:				niento «Suave»: 85 s niento «Pulsos»: 100 s
Frecuencia	de pulsos del chorro de agua:	1420 pt	ulsos	por mi	nuto
Presión del chorro mínima/máxima:		378-720 kPa			
Apagado automático:		después de 2 minutos de funcionamiento			
Condiciones de almacenamiento:		Temp.: -10 °C a +40 °C, HR 85 % o menos.			
Condiciones de funcionamiento:		Temp.: 0 °C a +40 °C, HR 85 % o menos.			
	dispositivo contra caídas y peraturas elevadas y la lu				enga el dispositivo protegido
13. EXPL	ICACIÓN DE LOS SÍM	BOLO	S D	EL EI	NVASE Y LAS ETIQUETAS
(<u>\$</u>	EA LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL	US0		1	ELIMINACIÓN MEDIANTE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
	OMBRE DEL FABRICANTE		Ē	_	MARCADO CE
REF N	IÚMERO DE ARTÍCULO				
LOT	ÚMERO DE LOTE (PARA LAS BOQUIL	LAS)	IP)	(7	GRADO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN EN LA CARCASA
SN	ÚMERO DE SERIE	0.0	- 1 -4	O°C OPERATION CONDITION	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, TEMPERATURA 0 °C ~ 40 °C
E	QUIPO DE CLASE II	-10°	c-	40°C STORAGE CONDITION	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, TEMPERATURA -10 °C ~ 40 °C
	e fabricación del dispositi				da en el número de serie

una Directiva Europea y las normas siguientes: Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU y - Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

La muestra enviada del equipo anterior ha sido evaluada para el marcado CE,

(SN) de la etiqueta. Los dos primeros números indican la semana y los otros dos

15. INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

números corresponden al año de fabricación.

La validez de la garantía es de 2 años desde la fecha de compra para el dispositivo y 6 meses para las boquillas estándar. Esta garantía no cubre daños provocados por un uso inadecuado. Cuando se detecte un defecto de fábrica durante el periodo

de validez de la garantía se reparará dicha unidad defectuosa y si la reparación es imposible se sustituirá por una nueva. La garantía no cubre componentes ni accesorios sujetos a desgaste, ni baterías, estuches o envases del artículo.



B.Well 🛡

Botón de modo Normal

Funciones de

control Mode Pulsos / Indicador de carga CH





















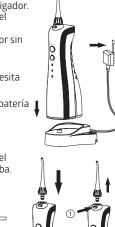

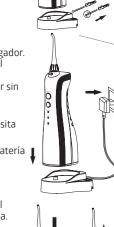









 PRECAUCIÓN No utilice el irrigador lleno de agua sin la boquilla, ya que podría provocar un mal funcionamiento del dispositivo. comienzo de las instrucciones, Sección 1, Precauciones de seguridad

- Para asegurar un funcionamiento sin problemas, asegúrese de que el irrigador
- No utilice el dispositivo sin agua, excepto en el momento de verter el agua
- boca. Inclínese sobre el lavabo y mantenga el dispositivo en posición vertical mientras dirige la boquilla hacia los dientes y las encías. No pulse el botón de encendido/apagado hasta que se haya metido la boquilla en la boca. Comience
- de los aparatos de ortodoncia. Para obtener mejores resultados, empiece por la
- lavarse los dientes con un cepillo. Lávese los dientes o la dentadura postiza después de comer durante al menos cinco minutos y luego utilice este dispositivo 8. Pulse el botón de encendido/apagado después de usar el irrigador para apagarlo y sáqueselo de la boca.



Utilice solo detergentes con pH neutro para limpiar el dispositivo. No utilice sosa cáustica ni sustancias abrasivas para la limpieza, ya que podría dañarlo.

- dispositivo. Después del lavado, seque la unidad principal con un paño. Cuando se utilice el irrigador en combinación con cualquier solución, deberá
 - Llene el depósito con agua. Después de la limpieza vacíe el depósito de agua. Si no tiene previsto utilizar el dispositivo hasta dentro de al menos una semana, seque el depósito por dentro y por fuera.

Enjuáguelo con agua y límpielo con un paño suave.

No lo doble, no tire de él y no lo retuerza.

Tubo de succión

El irrigador no funciona

El irrigador solo puede utilizarse durante varios

minutos, incluso después

residuo doméstico.

Vida útil de la batería:

Cargador (adaptador):

Capacidad del depósito de agua:

Tipo de batería:

de una carga:

Tiempo de carga de la batería:

Duración del funcionamiento después

dispositivo con un paño.

Depósito de agua

	La boquilla está bloqueada	Sustituya la boquilla	
El agua no sale por la	La boquilla está deformada	Sustituya la boquilla	
boquilla	El filtro está bloqueado	Limpie el filtro	
	La batería no está cargada lo suficiente	Cargue la batería durante 24 horas	
Water does not come from	El depósito del agua está vacío	Llene el depósito de agua	
nozzle	Posición incorrecta del dispositivo	Utilice la unidad principal en posición vertical	
	batería cuando termine la vida u		
de eliminarlo. No olvide Elimine la batería por se dudas relacionadas con en contacto con el centr	batería cuando termine la vida u protegerse las manos y los ojos eparado de la unidad electrónica la retirada de la batería de la u ro de servicio o llame a la línea o nbiental y reciclaje:	s para retirar la batería. a principal. En caso de nidad electrónica, póngase	

14. NORMA APLICADA

9443 Widnau, Suiza

Última revisión 2020-W50