


AR تعليمات التشغيل

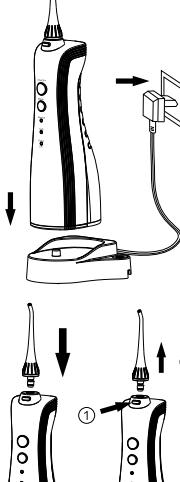


تستغرق البطارية 24 ساعة للشحن بالكامل.


6. شحن الجهاز

- قم بتوصيل الشاحن اللاسلكي بمصدر الطاقة.
- ضع المروء على الشاحن اللاسلكي.
- يوضع مؤشر(CH) أثناء شحن المروء ، وي مجرد شحن الجهاز بالكامل سينطفي مؤشر(CH).
- عند انتهاء الشحن، افصل الشاحن اللاسلكي من مصدر الطاقة.

④ ملحوظة: إذا استمر مؤشر CH في الوميض أثناء الإجراء وبعد ذلك، هذا يعني أن بطارية المروء تحتاج إلى الشحن.

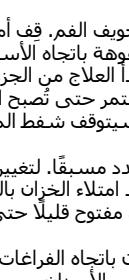

2

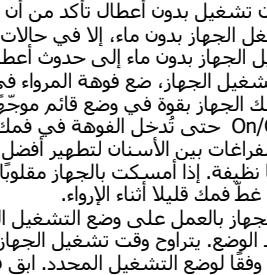

فتح غطاء خزان المياه، وامسک الوحدة


الرئيسية بحيث تكون مسبوقة واملاة الجزء العلوي من الخزان، بينما تمسك الوحدة الرئيسية.

أولاً، أغلق الغطاء، ثالثاً من له يغلاق

أياً الخزان بالماء عن طريق أي من الأساليب المقترنة:

7. استخدام الجهاز

- ثيث الفوهة في التجويف الخاص بها في الوحدة الرئيسية.
- لخلع الفوهة، اضغط على زر تحرير الفوهة وسحب الفوهة لأعلى.
- املاً الخزان بالماء عن طريق أي من الأساليب المقترنة:

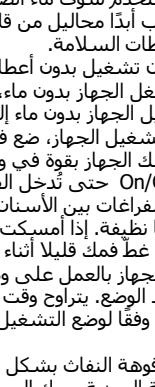

فتح غطاء خزان المياه، وامسک الوحدة

الرئيسية بحيث تكون مسبوقة واملاة الجزء العلوي من الخزان، بينما تمسك الوحدة الرئيسية.

أولاً، أغلق الغطاء، ثالثاً من له يغلاق

أياً الخزان بالماء عن طريق أي من الأساليب المقترنة:

① احذر! لا تستخدم أبداً مروء مملوء بالماء بدون فوهة، حيث قد يؤدي إلى تعطل الجهاز.

1. لا تستخدم أبداً محاليل من ماء الصبورة حتى جمجمة الأذن.

2. احتفاظها بالسلامة.

3. لضمان تشغيل بدون أخطاء تأكد من أن المروء في وضع الإيقاف عند ملاحة الخزان بالماء.

4. لا تشغيل الجهاز بدون ماء، إلا في حالات ندرة مياه متبقية بعد الاستخدام، قد يؤدي

تشغيل الجهاز بدون ماء إلى حدوث احتفاظ.

5. وأمسك الجهاز بفوهة في وضع قائم بوجهة بالتجاهز للوحدة الرئيسية، لا تضغط على زر On/Off حتى تخلص الفوهة في فمك.

عند الفواعات بين الأسنان تطهير أفال، امسنح حتى تصبح الماء حول الأسنان

وينتها نظيفة، إذا أمسكت بالجهاز مقلوباً، فسيتوقف شفط الماء من الخزان، لتجنب تناول

الماء، غلط فنك الماء، مما يزيد من الإزعاج.

6. يبدأ المروء بالعمل على تحريك الماء، قف أمام المروء وتحريك الماء على الأفق.

تحديد الموضع، تناول وقوف تشنغيل الجهاز عند انتهاء الخزان بالكامل من 40 إلى 100

ثانية، وفقاً لوضع التشغيل المحدد. إن فنك متوقف قليلاً حتى يمكن الماء من الخروج منه.

7. وجفف الفواعات بشكل عمودي قبل تجفيف الماء، يجرب إلأه اهتمام حاصن

للمعالجة السنية. حرك الجهاز بلفظ ياتجه الفواعات بين الأسنان، يجرب إلأه اهتمام حاصن

للتقط الماء، يجرب إلأه اهتمام حاصن