

TH-912

MUNSKÖLJARE



SV Bruksanvisning

Tack för att du har köpt munsköljaren TH-912 från B.Well. Apparaten hjälper till med effektiv rengöring av utrymmet mellan tänderna och avlägsnande av plack. Det förhindrar att tandsten bildas och är perfekt för förebyggande av karies och tandlössningssjukdomar. Munsköljaren TH-912 är en liten enhet för munvård om du har tandbryggor, implantat, kronor och konsoler. Det kan också användas för tandkötsmassage som förbättrar blodcirkulationen och främjar tandköttet läckning. Tre driftslägen säkerställer enhetens maximala effektivitet.

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

① VARNING!

Använd aldrig något av det följande som lösningar till munsköljare:

- Ämnen och lösningar som innehåller suspenderade partiklar (dekokter, suspensioner, infusioner osv.). Sådana partiklar kan orsaka blockering av sugslangen och munstyckets.
- Oljehaltiga lösningar. Olja är ett organiskt lösningsmedel och dess användning kan ha eroderande effekt på sugslangen och komponenterna i apparaten.
- Antiseptiska lösningar (kaliumpermanganat, miramistin och andra antiseptiska läkemedel).
- Vanliga munskölningsmedel.
- Saltlösningar, tandkräm eller kemiska ämnen.

Tillåtet för munsköljning:

- Rent ljummet vatten (upp till 40°C). Använd filtrerat vatten om du har kranvatten av dålig kvalitet i din region.
- Speciella sköljmedel för användning med munsköljaren (blandas alltid i ett bestämt förhållande med vatten. För rekommenderade proportioner, se anvisningar från tillverkaren av munsköljaren).

① **VARNING!** Om speciella lösningar munsköljare används, se till att rengöra enheten med färskt ljummet vatten efter användning: fyll vattentanken med vatten och kör en extra munskölningscykel genom att tömma ur apparaten genom munstycket.

Var uppmärksam på utgångsdatum för tillåtna lösningar. Använd aldrig lösningar efter deras båst-före-datum.

② VARNING!

- Apparaten har inbyggda batterier. Undvik att kasta dem i en eld, värma upp, ladda, använda eller lämna enheten på platser med hög lufttemperatur.
- Använd aldrig den induktiva laddaren med skadad sladd eller stickkontakt.

△ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

- Lämna eller förvara inte enheten och den kontaktlösa laddaren där den kan falla eller hamna i badkaret, handfatet eller toalettskålen. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.
- Sänk inte ned munsköljaren i vatten.
- Använd inte apparaten om laddaren eller dess nätsladd är skadad eller inte korrekt anslutet. Detta kan leda till elektriska stötar, kortslutning eller brand. Den ska ersättas av tillverkaren eller av en behörig serviceagent.
- Bryt, böj, dra eller vrid inte nätsladden eller utsätt den för alltför mycket kraft. Placerar inte heller tunga föremål på nätsladden och placera inte nätsladden mellan sådana föremål. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.
- Sänk inte ner den kontaktlösa laddaren i vatten eller tvätta den med vatten. Detta kan leda till elektriska stötar eller kortslutning.
- Sätt inte i eller koppla bort den kontaktlösa laddaren från eluttaget med våta händer. Detta kan leda till elektriska stötar.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn. Underlätenhet att följa regeln kan leda till olyckor och farliga situationer, till exempel att ett barn oavskilt sväljer enhetens tillbehör eller löstagbara delar.
- Rengör regelbundet den kontaktlösa laddaren, så att den inte samlar damm. Underlätenhet att iakta denna försiktighetsåtgärd kan leda till brand på grund av isoleringsfel som orsakas av fuktighet och dammansamling.
- Kontrollera alltid att den kontaktlösa laddaren är ansluten till en strömkälla med lämplig märkpåläggning. Underlätenhet att göra detta kan leda till elektriska stötar eller brand.
- Demontera eller reparera inte instrumentet på egen hand. Detta kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.
- För reparation (t.ex. batteribyte) kontakta ett auktoriserat B.Well service- och supportcenter.
- Förvara inte enheten där den kan rama ned och gå sönder (t.ex. på ett handfat).
- Använd inte apparaten om du har tappat bort munstyckena.

△ VARNING:

- Barn och personer som inte självständigt kan använda enheten, liksom personer med en försvagad känslighet i munhålan, bör inte använda sig av denna enhet. Underlätenhet att göra detta kan leda till personsadka. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handlingen eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna som är involverade.

Använd enheten uteslutande för rengöring av munhålan. Högtrycksvattenstrålen riktad mot ögon, näsa, öron eller hals kan orsaka allvarliga skador. Rådfråga en tandläkare innan du använder denna enhet för behandling av munhålan eller av personer med svår parodontal sjukdom.

Människor som lider av tandvärk eller tandkötsmärta kan inte använda munsköljaren i vilket fall. Konsultera tandläkare

Tryck inte munstycket hårt mot tänder eller tandkött under användning, eftersom det kan orsaka skada.

Håll aldrig vatten med en temperatur över 40°C i tanken.

Ta alltid tag i stickkontakten när du kopplar bort den kontaktlösa laddaren från ett eluttag, och inte i sladden. Underlätenhet att göra detta kan leda till elektriska stötar, kortslutning eller brand.

Håll apparaten ren, använd endast färskt och ljummet kranvatten för munrengöring. Vissa typer av vätskor kan skada apparaten. Använd därför aldrig vätskor från den förbjudna listan för munskölningsmedel.

Efter användning av apparaten, se till att hålla ut det återstående vattnet från vattentanken och slå på apparaten i 2-3 sekunder för att tömma den helt. Om de sanitära normerna för användning av produkten inte följs kan mögel och bakterier utvecklas i produkten, vilket kan vara skadligt för hälsan. Det kan också leda till obehälig lukt och funktionsstörningar.

2. AVSEDD ANVÄNDNING

Munsköljaren TH-912 med tillbehör är utformad för:

- Omfattande vård och hygienstöd för munhåla och interdentala tandutrymmen.
- Vård av munhålan hos personer som använder tandbryggor, implantat, kronor och tandställningar.
- Rengöring och massage av tandkött.

Den är avsedd för privat bruk.

Kontraindikationer:

- Innan du använder munsköljaren, rekommenderas det att du konsulterar en tandläkare i händelse av kirurgiskt ingrepp i munhålan och vid förvärning av kronika sjukdomar i munhålan.
- Under de första användningarna av munsköljaren kan lätt blödning av tandköttet uppstå.
- Vid frisk tandkött bör all blödning i tandköttet upphöra inom 1-2 veckor.
- Om du får tandkötsblödning efter 2 veckors användning, sluta använda munsköljaren och rådfråga en tandläkare.

3. INNEHÅLL I LEVERANS

Munsköljare TH-912

Leveransinnehåll:

- Munsköljare
- 2 st. standardmunstycken
- Ortodontiskt munstycke - 1 st.
- Tungrengöringsmunstycke - 1 st.
- Periodontalmunstycke (för tandkött) - 1 st.
- Vattentank 150 ml
- Filter - 1 st.
- Sugslang - 1 st.
- Väggfikeringssats (uppsättning skruvar och väggpluggar)
- Förvaringspåse - 1 st.
- Kontaktlös laddare - 1 st.
- Bruksanvisning - 1 st.
- Garantikort - 1 st.
- Låda - 1 st.

① **Obs!** Det kan finnas fukt inuti vattentanken eller i sugslangen vid inköpstillsfället. Detta är fukt från destillerat vatten som används för produkttestning och är säkert för människor.

Tillbehör till B.Wells munsköljare TH-912 (säljs separat):

Munstycken set:

Munstycke till munsköljare TH-912 STANDARD



Utvärmad för att rengöra de interdentala utrymmen från bakterier och matpartiklar. Rekommenderad användningsperiod före utbyte - 6 månader.

VIKTIGT:

Varje familjemedlem använder sitt eget munstycke för att säkerställa personlig hygien. För detta ändamål är munstyckena märkta med olika färger.

Munstycke till munsköljare TH-912 ORTODONTISK

Perfekt för rengöring av bryggor, tandställningar och kronor. Rengör effektivt alla komponenter i artificiella strukturer.

Rekommenderad användningsperiod före utbyte - 6 månader.

Munstycke till munsköljare TH-912 TUNGRENGÖRING

Lämplig för daglig tungrengöring. Avlägsna bakterieplack och fräscha upp andedräkten.

Rekommenderad användningsperiod före utbyte - 6 månader.

Munstycke till munsköljare TH-912 PARODONTAL

Utvärmad för rengöring av tandkötsmarginal och gingivalfickor, samt för rengöring av protesytan under proteser och tandbryggor.

Rekommenderad användningsperiod före utbyte - 6 månader.

4. FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNING

Tryck på PÅ/AV-knappen för att slå på/av apparaten. Tryck på knappen Läge för att välja önskat läge för vattenstråle (normal, mjuk, puls). Det valda läget visas med lägesindikatorer. Om du vill använda ett annat läge trycker du på lägesomkopplarena tills den ändras till önskad inställning. Genom att trycka på lägesomkopplarena ändras läget från Normal till Mjuk och Puls.


Läge och dess indikator

- Lägesomkopplare (genom att trycka på den ändras vattenstrålets inställning och belysningen av aktuell lägesindikator).
- Normal - effektiv munrengöring.

3. **Mjuk** - noggrann rengöring för känsliga tänder och tandkött.

4. **Puls** - rengöring och massage av tandkött.

① **Obs!** När du använder enheten för första gången, tryck på PÅ/AV-knappen för att slå på den och testa varit och ett vattenstrålets lägen med tanken fyllt med vatten.

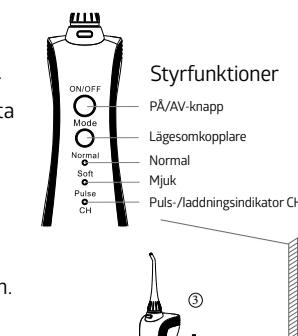


5. VÄGGFIXERING AV APPARATEN

Vid behov kan munsköljaren fästas på väggen.

Krav- och pluggsats ingår.

Monteringshål finns på baksidan av laddaren.

- Mät avståndet mellan hålen och driv i pluggar och skruvar i de markerade punkterna på väggen.
- Fäst laddaren på skruvarna som drivs in i väggen.
- Kontrollera dessutom att väggfästet är säkert.

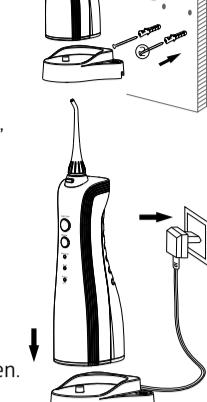

6. ENHETSLADDNING

1. Anslut den kontaktlösa laddaren till elnätet.


2. Placera munsköljaren på den kontaktlösa laddaren.

3. "CH"-indikatorn. Blinkar under laddning av irrigatoren, när enheten är fulladdad stängs "CH"-indikatorn av.

- När laddningen är klar, koppla ur den kontaktlösa laddaren från elnätet.

① **Obs!** Om CH-indikatorn fortsätter att blinka under och efter proceduren betyder det att munsköljarens batteri måste laddas.

Det tar cirka 24 timmar att ladda batteriet helt.

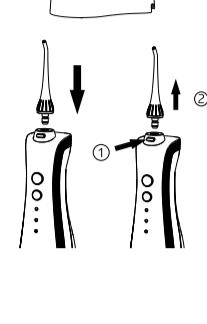


7. ANVÄNDA APPARATEN

- Fäst munstycket i relevant inbuktning i huvudenheten.

För att dra ut munstycket, tryck på knappen för att frigöra munstycket och dra munstycket uppåt.

- Fyll tanken med vatten med någon av de föreslagna metoderna:

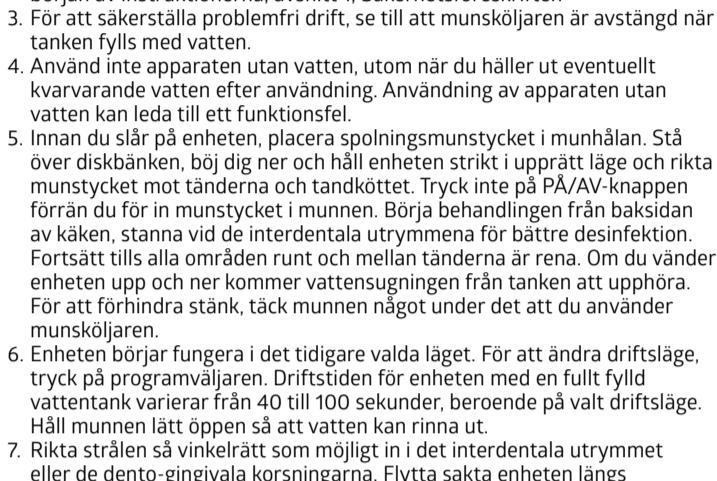

① **VARNING!** Använd aldrig en vattenfyld munsköljare utan munstycket, vilket kan orsaka fel på enheten.

1. Använd alltid färskt kranvatten.

2. Håll aldrig i lösningen från listan över förbjudna lösningar, som anges i början av instruktionerna, avsnitt 1, Säkerhetsföreskrifter.

- För att säkerställa problemfri drift, se till att munsköljaren är avstängd när tanken fylls med vatten.

4. Använd inte apparaten utan vatten, utom när du håller ut eventuellt kvarvarande vatten efter användning. Användning av apparaten utan vatten kan leda till ett funktionsfel.

5. Innan du slår på enheten, placera spolningsmunstycket i munhålan. Stå över diskbänken, böj dig ner och håll enheten strikt i uppåtriktat läge och rikta munstycket mot tänderna och tandköttet. Tryck inte på PÅ/AV-knappen förrän du för in munstycket i munen. Börja behandlingen från baksidan av kakan, stanna vid de interdentala utrymmena för bättre desinfektion. Fortsätt tills alla områden runt och mellan tänderna är rena. Om du vänder enheten upp och ner kommer vattensugningen från tanken att upphöra. För att förhindra stänk, täck munnen något under det att du använder munsköljaren.

6. Enheten börjar fungera i det tidigare valda läget. För att ändra driftsläge, tryck på programväxlaren. Driftstiden för enheten med en fullt fyllt vattentank varierar från 40 till 100 sekunder, beroende på valt driftsläge. Håll munnen långt öppen så att vatten kan rinna ut.

7. Rikta strålen så vinkelrätt som möjligt in i det interdentala utrymmet eller de dento-gingivala korsningarna. Flytta sakta enheten längs tandbågen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt bearbetningen av det interdentala utrymmet och området runt tandställningen. För bästa resultat, börja med kindtandområdet (bakre tänder) och rör dig långsamt mot de främre tänderna. Flytta enheten längs tandköttet, pauza vid interdentala utrymmena. Fortsätt tills alla områden runt och mellan tänderna är helt rengjorda. Men kom ihåg att användning av munsköljare inte är ett substitut för att borsta tänderna. Borsta tänderna eller tandproteserna efter att ha ätit i minst fem minuter och använd sedan denna enhet.

8. Efter användning, tryck på PÅ/AV-knappen för att stänga av munsköljaren och ta bort munsköljaren från munhålan.

9. För enkel användning kan du rotera fästet i en vinkel på 360° runt axeln.

8. EFTER ANVÄNDNING

- Öppna vattentankslocket eller lossa tanken utan att lossa spolningsmunstycket, och töm ut vattnet.