

# TH-912

MÁY TẮM NƯỚC



## VI Hướng dẫn Sử dụng

Cảm ơn bạn đã mua máy tắm nước TH-912 của B.Well. Thiết bị này hữu ích để vệ sinh hiệu quả kẽ răng và mảng bám. Thiết bị này ngăn ngừa hình thành cao răng và hoàn hảo để ngăn ngừa sâu răng và các bệnh quanh răng. Máy tắm nước TH-912 là một thiết bị nhỏ gọn dùng để chăm sóc răng miệng nếu bạn sử dụng cầu răng, răng cấy, chụp răng và niềng răng. Cũng có thể sử dụng thiết bị này để mát xa nướu, giúp cải thiện tuần hoàn máu và thúc đẩy quá trình làm lành nướu. Ba chế độ hoạt động giúp đảm bảo hiệu suất tối đa của thiết bị.

## 1. BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN

### ⓘ CẢNH BÁO!

**Không bao giờ được sử dụng các chất dưới đây để làm dung dịch xịt rửa miệng:**

- Các chất và dung dịch có chứa các hạt lơ lửng (thuốc sắc, dung dịch huyền phù và dịch truyền, v.v.). Các hạt đó có thể gây tắc ống hút và vòi phun.
- Dung dịch có chứa dầu. Dầu là một dung môi hữu cơ và sử dụng dầu có thể gây ăn mòn ống hút và các bộ phận của thiết bị.
- Các dung dịch khử trùng (muối kali, miramistin và các loại thuốc khử trùng khác).
- Các dung dịch súc miệng thông thường.
- Dung dịch muối, kem đánh răng hoặc các loại hóa chất.

### Được phép dùng để xịt rửa miệng:

- Nước ấm sạch (tối đa 40°C). Sử dụng nước lọc nếu nước máy ở khu vực của bạn kém chất lượng.
- Các dung dịch súc rửa đặc biệt để dùng cho máy tắm nước (luôn được trộn với nước theo tỷ lệ xác định. Để biết tỷ lệ khuyến cáo, hãy tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất dung dịch súc rửa).

**ⓘ THẬN TRỌNG! Nếu sử dụng dung dịch đặc biệt cho máy tắm nước, đảm bảo vệ sinh thiết bị bằng nước ấm sạch sau khi sử dụng dung dịch đó: đổ nước vào bình đựng nước và chạy thêm một chu trình xịt rửa, bằng cách xả sạch nước khỏi thiết bị qua đầu tắm.** Đặc biệt chú ý đến hạn sử dụng cả các dung dịch được phép sử dụng. Không bao giờ được sử dụng dung dịch đã hết hạn sử dụng.

### ⓘ THẬN TRỌNG!

- Thiết bị có pin được tích hợp sẵn. Tránh ném thiết bị vào lửa, sưởi, sạc hoặc để thiết bị ở những chỗ có nhiệt độ môi trường cao.
- Không bao giờ được sử dụng bộ sạc cắm ứng có dây nguồn hoặc phích cắm đã bị hỏng.

### ⚠ THẬN TRỌNG:

- Không được để hoặc bảo quản thiết bị và bộ sạc không tiếp xúc ở nơi có thể bị rơi hoặc rơi xuống bồn tắm, bồn rửa hoặc bồn cầu. Việc này có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không được nhúng máy tắm nước xuống nước.
- Không được sử dụng thiết bị nếu bộ sạc hoặc dây nguồn đã bị hỏng hoặc không được kết nối đúng cách. Việc này có thể gây điện giật, chập mạch hoặc hỏa hoạn. Bộ sạc hoặc dây nguồn phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc một đại diện bảo dưỡng đủ trình độ.
- Không được bẻ, uốn, kéo hoặc vặn hoặc tác động lực quá mạnh lên dây nguồn. Ngoài ra, không được để vật nặng đè lên dây nguồn và không được đặt dây nguồn vào giữa các vật đồ. Việc này có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không được nhúng bộ sạc không tiếp xúc xuống nước hoặc dùng nước rửa bộ sạc không tiếp xúc. Việc này có thể gây điện giật hoặc chập mạch.
- Không được cắm hoặc ngắt bộ sạc không tiếp xúc ra khỏi ổ cắm điện bằng tay ướt. Việc này có thể gây điện giật.
- Bảo quản thiết bị ở xa tầm tay trẻ em. Việc không tuân thủ quy tắc này có thể gây ra tai nạn và các tình huống nguy hiểm, chẳng hạn trẻ nhỏ có thể vô tình nuốt phải phụ kiện hoặc các bộ phận tách rời của thiết bị.
- Thường xuyên vệ sinh bộ sạc không tiếp xúc để tránh tích tụ bụi. Việc không tuân thủ biện pháp phòng ngừa này có thể gây ra hỏa hoạn do lớp cách điện bị hỏng do hơi ẩm và bụi tích tụ.
- Luôn đảm bảo rằng bộ sạc không tiếp xúc đã được kết nối với nguồn điện có điện áp định mức phù hợp. Việc không tuân thủ quy tắc này có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không được tự ý tháo rời hoặc sửa chữa thiết bị. Việc này có thể gây hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho bản thân.
- Đối với việc sửa chữa (chẳng hạn thay pin), hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng và Hỗ trợ Ủy quyền của B.Well.
- Không được bảo quản thiết bị ở nơi dễ bị rơi và vỡ thành nhiều mảnh (ví dụ: trên một chậu rửa).
- Không được sử dụng thiết bị khi đã bị mất các đầu tắm.

### ⚠ CẢNH BÁO:

- Trẻ em và người không thể tự vận hành được thiết bị cũng như người có độ nhạy cảm của khoang miệng bị suy giảm không nên sử dụng thiết bị này. Việc không tuân thủ quy tắc này có thể gây thương tích cho bản thân. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm về khả năng thể chất, giác quan và tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.
- Chỉ sử dụng thiết bị này cho việc vệ sinh khoang miệng. Tia nước áp lực cao hướng thẳng vào mắt, mũi, tai hoặc họng có thể gây thương tích nghiêm trọng. Trước khi sử dụng thiết bị này để điều trị khoang miệng hoặc khi người mắc bệnh nặng về kẽ răng sử dụng thiết bị này, hãy tham vấn với nha sĩ.
- Những người bị đau răng hoặc đau nướu không được sử dụng máy tắm nước trong mọi trường hợp. Xin lời khuyên của nha sĩ.
- Trong quá trình sử dụng, không được ấn đầu tắm quá mạnh vào răng hoặc nướu vì việc này có thể có hại cho răng và nướu của bạn.
- Không bao giờ được cho nước nóng hơn 40°C vào bình đựng nước.
- Khi ngắt kết nối bộ sạc không tiếp xúc khỏi ổ cắm điện, hãy luôn cầm vào phích cắm điện thay vì dây nguồn. Việc không tuân thủ quy tắc này có thể gây điện giật, chập mạch hoặc hỏa hoạn.
- Đảm bảo thiết bị luôn sạch sẽ, chỉ sử dụng nước máy sạch và ấm để vệ sinh miệng. Một số loại chất lỏng có thể làm hỏng thiết bị. Do đó, không bao giờ được sử dụng chất lỏng thuộc danh sách cấm sử dụng để xịt rửa.
- Sau khi sử dụng thiết bị, đảm bảo đổ nước còn lại ra khỏi bình đựng nước và bật thiết bị trong 2-3 để xả nước hoàn toàn. Trong trường hợp không tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh khi sử dụng thiết bị, nấm mốc và vi khuẩn có thể phát triển trong thiết bị và gây hại cho sức khỏe. Việc này cũng gây mùi khó chịu và hỏng hóc thiết bị.

## 2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Máy tắm nước TH-912 kèm phụ kiện được thiết kế để:

- Chăm sóc toàn diện và hỗ trợ vệ sinh cho khoang miệng và kẽ răng;
- Chăm sóc khoang miệng của người làm cầu răng, cấy răng, chụp răng và niềng răng.
- Vệ sinh và mát xa nướu.

Thiết bị được thiết kế cho mục đích sử dụng cá nhân.

### Chống chỉ định:

- Trước khi sử dụng máy tắm nước, khuyến cáo bạn nên tham vấn nha sĩ trong trường hợp đã phẫu thuật can thiệp trong khoang miệng và trong giai đoạn bùng phát cấp tính của một bệnh mãn tính trong khoang miệng.
- Trong vài lần sử dụng máy tắm nước đầu tiên, có thể xảy ra hiện tượng chảy máu nhẹ ở nướu.
- Trong trường hợp nướu khỏe mạnh, hiện tượng chảy máu nướu răng sẽ hết trong vòng từ 1-2 tuần.
- Nếu bạn bị chảy máu nướu sau 2 tuần sử dụng, hãy ngừng sử dụng và tham vấn nha sĩ.

## 3. BỘ SẢN PHẨM GỒM CÓ

**Bộ sản phẩm máy tắm nước TH-912 gồm có:**

1. Máy tắm nước
2. 2 đầu tắm tiêu chuẩn
3. Đầu tắm chính nha – 1 chiếc
4. Đầu tắm làm sạch lưỡi – 1 chiếc
5. Đầu tắm quanh răng (dành cho nướu) – 1 chiếc
6. Bình đựng nước 150 ml
7. Bộ lọc – 1 chiếc
8. Ống hút – 1 chiếc
9. Bộ phụ kiện gắn tường (bộ vít và chốt định vị trên tường)
10. Túi bảo quản – 1 chiếc
11. Bộ sạc không tiếp xúc – 1 chiếc
12. Hướng dẫn Sử dụng – 1 quyển
13. Thẻ bảo hành – 1 chiếc
14. Hộp đựng – 1 chiếc

**ⓘ Lưu ý:** Có thể có hơi ẩm bên trong bình đựng nước hoặc ống hút tại thời điểm mua. Đây là hơi ẩm còn sót lại từ nước cất được sử dụng để kiểm tra sản phẩm và an toàn với con người.

### Phụ kiện của máy tắm nước TH-912 của B.Well (được bán riêng):

#### Bộ đầu tắm:

#### Đầu tắm TIÊU CHUẨN cho máy tắm nước TH-912




Được thiết kế để khả năng làm sạch vi khuẩn và mảnh vụn thức ăn trong kẽ răng. Thời gian sử dụng khuyến cáo – 6 tháng.

### ⚠ THÔNG TIN QUAN TRỌNG:

Để đảm bảo vệ sinh cá nhân, mỗi thành viên gia đình cần sử dụng đầu tắm của riêng mình.  
Để phục vụ mục đích này, đầu tắm được đánh dấu bằng các màu khác nhau.

#### Đầu tắm CHÍNH NHA cho máy tắm nước TH-912

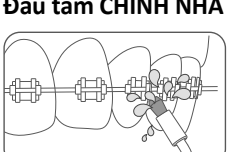

Lý tưởng dùng để làm sạch cầu răng, niềng răng và mảng bám.  
Làm sạch hiệu quả tất cả các thành phần của các kết cấu nhân tạo.  
Thời gian sử dụng khuyến cáo – 6 tháng.



#### Đầu tắm LÀM SẠCH LƯỠI cho máy tắm nước TH-912




Phù hợp để làm sạch lưỡi hàng ngày.  
Loại bỏ cao răng chứa vi khuẩn và làm cho hơi thở trở nên thơm tho.  
Thời gian sử dụng khuyến cáo – 6 tháng.

#### Đầu tắm KẼ RĂNG cho máy tắm nước TH-912

Được thiết kế để làm sạch mép nướu và túi nha chu như làm sạch bề mặt răng bên dưới răng giả và cầu răng.  
Thời gian sử dụng khuyến cáo – 6 tháng.

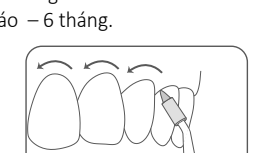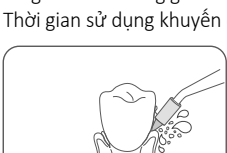

## 4. CHUẨN BỊ

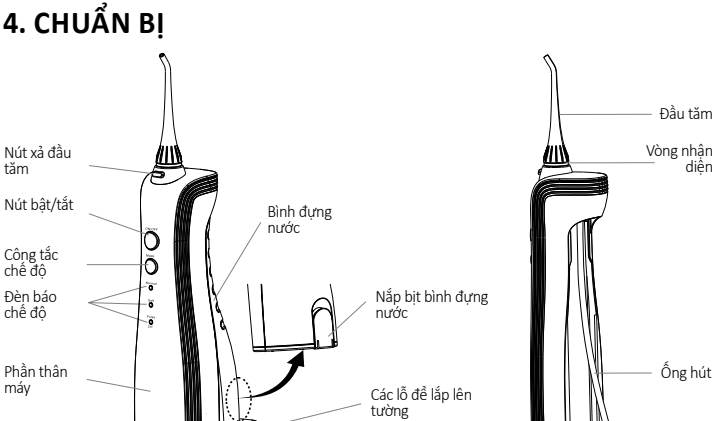

Nhấn nút Bật/tắt để bật/tắt thiết bị. Nhấn nút Chế độ để chọn chế độ phun nước mong muốn (thông thường, nhẹ nhàng, massage). Chế độ đã chọn sẽ được hiển thị bằng đèn báo chế độ. Nếu bạn muốn sử dụng một chế độ khác, nhấn công tắc chế độ cho đến khi chuyển sang cài đặt mong muốn. Nhấn công tắc chế độ để thay đổi chế độ từ Thông thường sang Nhẹ nhàng và massage.

### Chế độ và đèn báo chế độ

1. Công tắc chế độ (nhấn công tắc này sẽ làm thay đổi cài đặt phun nước và làm sáng đèn báo chế độ liên quan).
2. **Normal** – vệ sinh miệng hiệu quả.

3. **Soft** – vệ sinh cẩn thận cho răng và nướu nhạy cảm.
4. **Pulse** – vệ sinh và mát xa nướu.


**ⓘ Lưu ý:** Khi bạn sử dụng thiết bị lần đầu, nhấn nút Bật/Tắt để bật thiết bị và kiểm tra từng chế độ phun nước với bình đã được đổ nước.



## 5. LẮP MÁY TẮM NƯỚC LÊN TƯỜNG

Nếu cần, có thể lắp máy tắm nước lên tường. Bộ vít và chốt định vị được trang bị kèm. Lắp lắp nằm ở mặt sau của bộ sạc.

1. Đo khoảng cách giữa các lỗ và vặn chốt định vị và vít vào các điểm được đánh dấu trên tường.
2. Lắp bộ sạc với vít đã được bắt lên tường.
3. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng việc lắp lên tường đã được thực hiện một cách chắc chắn.

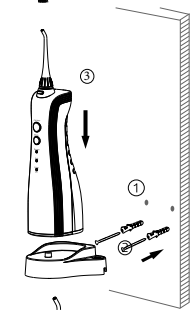


## 6. SẠC THIẾT BỊ

1. Kết nối bộ sạc không tiếp xúc với nguồn điện.
2. Đặt máy tắm nước lên bộ sạc không tiếp xúc.
3. Chỉ báo "CH". Nhấp nhảy trong khi sạc thiết bị tươi, khi thiết bị được sạc đầy, đèn báo "CH" sẽ tắt.
4. Khi đã sạc xong, ngắt bộ sạc không tiếp xúc ra khỏi nguồn.

**ⓘ Lưu ý:** nếu đèn CH vẫn tiếp tục nhấp nháy trong và sau quy trình này nghĩa là đã đến lúc cần thay pin của máy tắm nước.  
Sẽ mất khoảng 24 giờ để sạc đầy pin.

## 7. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

1. Lắp đầu tắm vào hốc lõm tương ứng ở trên phần thiết bị chính. Để tháo đầu tắm, nhấn nút đầu tắm và kéo đầu tắm lên trên.
2. Đổ nước vào bình theo bất kỳ phương pháp được đề xuất sau đây:

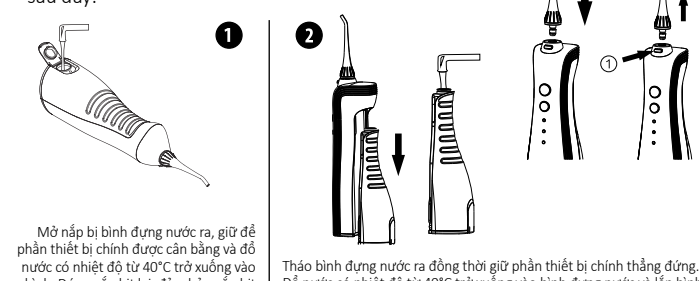

Mở nắp bị bình đựng nước ra, giữ để phần thiết bị chính được cân bằng và đổ nước có nhiệt độ từ 40°C trở xuống vào bình. Đóng nắp bị lại, đảm bảo nắp bị đã khóa chặt.  
Tháo bình đựng nước ra đồng thời giữ phần thiết bị chính thẳng đứng. Đổ nước có nhiệt độ từ 40°C trở xuống vào bình đựng nước và lắp bình đựng nước trở lại thiết bị.

**ⓘ THẬN TRỌNG! Không bao giờ được sử dụng máy tắm nước đã đổ nước mà không có đầu tắm vì việc này có thể làm hỏng thiết bị.**

1. Chỉ được sử dụng nước máy sạch.
2. Không bao giờ đổ dung dịch có trong danh sách cấm sử dụng, được mô tả ở phần đầu vào hướng dẫn, Mục 1, Biện pháp Đảm bảo An toàn.
3. Để đảm bảo quá trình sử dụng không gặp sự cố, đảm bảo bạn tắt máy tắm nước trong lúc đổ nước vào bình.
4. Không được vận hành thiết bị khi chưa có nước, phòng trường hợp bất kỳ phần nước nào còn sót lại sau khi sử dụng bị đổ ra ngoài. Vận hành thiết bị khi không có nước có thể gây hỏng hóc.
5. Trước khi bật thiết bị, đưa đầu tắm của máy tắm nước vào khoang miệng. Đứng trước bồn rửa, cúi người xuống và giữ thiết bị chắc chắn theo hướng thẳng đứng, hướng đầu tắm về phía răng và nướu. Không được nhấn nút BẬT/TẮT cho đến khi bạn cho đầu tắm vào trong miệng của mình. Bắt đầu điều trị từ mặt sau của răng hàm, dừng lại ở các kẽ răng để khử trùng hiệu quả hơn. Tiếp tục cho đến khi toàn bộ các khu vực xung quanh và giữa các răng đã sạch. Nếu úp thiết bị quay xuống dưới, lực hút nước từ bình đựng nước sẽ dừng lại. Để tránh bắn nước ra ngoài, hơi chế miệng lại trong lúc xịt rửa.
6. Thiết bị bắt đầu hoạt động ở chế độ đã được chọn sẵn. Để thay đổi chế độ vận hành, nhấn nút lựa chọn chế độ. Thời gian vận hành của thiết bị khi bình đựng nước đầy nước dao động từ 40 đến 100 giây, tùy thuộc vào chế độ vận hành được chọn. Mở hé miệng của bạn để nước có thể chảy ra ngoài.
7. Hướng tia nước vuông góc nhất có thể vào kẽ răng hoặc chỗ tiếp giáp giữa răng và lợi. Từ từ di chuyển thiết bị dọc theo vòm răng. Đặc biệt chú ý đến việc xử lý kẽ răng và khu vực xung quanh niềng răng. Để đạt kết quả tốt nhất, hãy bắt đầu với khu vực xung quanh (răng phía sau) rồi di chuyển từ từ ra răng phía trước. Di chuyển thiết bị dọc theo nướu, dừng lại ở các kẽ răng. Tiếp tục cho đến khi toàn bộ các khu vực xung quanh và giữa các răng đã được vệ sinh kỹ. Tuy nhiên, nên nhớ rằng việc xịt rửa miệng không thay thế được việc đánh răng. Đánh răng hoặc vệ sinh hàm răng giả của bạn trong tối thiểu năm phút và sau đó sử dụng thiết bị này.
8. Sau khi sử dụng, nhấn nút BẬT/TẮT để tắt thiết bị và đưa máy tắm nước ra khỏi khoang miệng.
9. Để tiện sử dụng, bạn có thể xoay tay cầm theo góc 360° quanh trục của nó.

## 8. SAU KHI SỬ DỤNG

1. Để nguyên đầu tắm của máy tắm nước, mở nắp bị bình đựng nước hoặc tháo bình đựng nước ra và xả sạch nước.
2. Bật thiết bị trong vài giây để xả sạch nước còn sót lại.
3. Lau máy tắm nước bằng một miếng vải khô.

### ⓘ LƯU Ý:

- Luôn xả sạch nước còn sót lại. Việc này sẽ giúp ngăn chặn nhiễm bẩn và phát triển vi khuẩn trong phần nước còn sót lại bên trong thiết bị.
- Nếu bạn không định sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, nhớ lau sạch thiết bị và để khô trước khi bảo quản.

## 9. BẢO QUẢN VÀ VỆ SINH

### Vệ sinh

Tắt thiết bị đi, tháo bình đựng nước và đầu tắm ra. Khi rửa, không bao giờ được sử dụng nước có nhiệt độ trên 50°C. Chỉ sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa có độ PH trung tính để vệ sinh thiết bị. Không bao giờ được sử dụng nước soda ăn mòn hoặc chất mài mòn để vệ sinh vì các chất này có thể làm hỏng thiết bị.

### Phần Thiết bị Chính

Sử dụng một miếng vải để vệ sinh phần thiết bị chính. Sử dụng nước xà phòng hoặc nước để loại bỏ bụi bẩn khô tiếp cận. Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa có độ PH trung tính. Không bao giờ được sử dụng chất ăn mòn và mài mòn (ví dụ: giấm hoặc dung môi có cồn vôi) vì các chất này có thể làm hỏng thiết bị.

- Không bao giờ được nhúng phần thiết bị chính xuống nước.
- Sau khi rửa, lau sạch phần thiết bị chính bằng một miếng vải.
- Nếu sử dụng bất kỳ dung dịch nào cho máy tắm nước, phải luôn súc rửa máy tắm nước sau mỗi lần sử dụng. Để súc rửa, đổ nước ấm vào bình đựng nước và bật thiết bị lên, hướng tay cầm chúi xuống chậu rửa và sau đó lau khô thiết bị.

### Bình đựng nước

- Súc rửa bình bằng nước.
- Sau khi vệ sinh, xả sạch nước khỏi bình.
- Nếu bạn không định sử dụng thiết bị trong một tuần hoặc lâu hơn, để khô bình cả mặt trong và mặt ngoài.
- Chỉ sử dụng các chất tẩy rửa mềm, có độ PH trung tính để vệ sinh.

### Đầu tắm

Rửa đầu tắm bằng nước sau mỗi lần sử dụng.

### Ống hút

- Súc rửa bằng nước, lau sạch bằng một miếng vải.
- Không được uốn, kéo hoặc vặn.

## 10. SỰ CỐ TIỀM ẨN

Sự cố	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Máy tắm nước không hoạt động	Bạn quên mở máy thiết bị hoặc không sử dụng thiết bị trong hơn 3 tháng	Sạc pin trong 24 giờ
Chỉ sử dụng được máy tắm nước trong vài phút, kể cả sau khi sạc	Sắp hết chu trình làm việc của pin Pin chưa được sạc đủ điện	Liên hệ với trung tâm bảo dưỡng Sạc pin trong 24 giờ
Áp suất nước thấp	Đầu tắm bị tắc	Thay đầu tắm
	Đầu tắm bị bóp méo	Thay đầu tắm
	Bộ lọc bị tắc	Vệ sinh bộ lọc
Đầu tắm không phun nước	Pin chưa được sạc đủ điện	Sạc pin trong 24 giờ
	Bình đựng nước không có nước	Đổ nước vào bình
	Sử dụng thiết bị sai tư thế	Sử dụng phần thiết bị chính ở tư thế thẳng đứng

## 11. TIÊU HỦY PIN VÀ THIẾT BỊ

Sau khi thiết bị hết tuổi thọ làm việc và trước khi tiêu hủy, đảm bảo hãy tháo pin ra. Không được quên việc bảo vệ mắt và tay trong khi tháo pin. Tiêu hủy pin độc lập với cụm thiết bị điện tử chính. Trong trường hợp có câu hỏi liên quan đến việc tháo pin khỏi cụm thiết bị điện tử, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo dưỡng hoặc gọi đến đường dây trợ giúp.

### Bảo vệ môi trường và tái chế:


Thiết bị được trang bị pin lithium-ion. Vui lòng đảm bảo tiêu hủy pin ở đúng nơi quy định, nếu có nơi quy định riêng như vậy. Khi phát hiện các bộ phận của bạn. Không được tháo rời hoặc thay thế pin để tiếp tục sử dụng thiết bị. Chỉ thay thế pin tại một trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền. Phải tiêu hủy thiết bị theo các tiêu chuẩn áp dụng thay vì thải bỏ như chất thải sinh hoạt.

## 12. THÔNG SỐ

Thời gian sạc pin:	≈ 24 giờ
Tuổi thọ làm việc của pin:	tối đa 500 chu trình sạc/xả
Loại pin:	Li-Ion, DC 3,7V
Thời gian sử dụng cho một lần sạc:	≈ 60 phút
Bộ sạc không tiếp xúc:	100–240 V, 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ:	0,7–1,7 W
Kích thước (R × C × S):	56 × 79 × 195 mm
Trọng lượng:	Bộ sạc không tiếp xúc – 176 g Phần thiết bị chính – 282 g
Dung tích bình đựng nước:	150 ml
Thời gian hoạt động với bình đựng nước đầy:	Chế độ vận hành "Normal" – 40–60 giây Chế độ vận hành "Soft" – 85 giây Chế độ vận hành "Pulse" – 100 giây
Tốc độ xung của tia nước:	1420 xung nhịp mỗi phút
Áp suất tia nước tối thiểu/tối đa:	378–720 kPa
Tự động tắt nguồn:	sau 2 phút hoạt động
Điều kiện bảo quản:	Nhiệt độ: -10°C đến +40°C, RH 85% trở xuống.
Điều kiện vận hành:	Nhiệt độ: 0°C đến +40°C, RH 85% trở xuống.

Bảo vệ không để thiết bị bị rơi hoặc va chạm mạnh. Để thiết bị ở xa chỗ có nhiệt độ cao, tránh ánh nắng trực tiếp.

## 13. GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU TRÊN BAO BÌ VÀ NHÃN

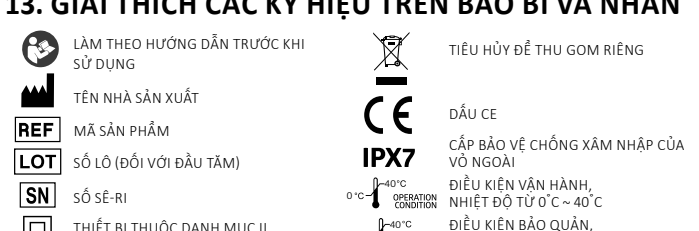

Ngày sản xuất thiết bị được mã hóa trên nhãn, trong số seri (SN): hai chữ số đầu tiên là tuần sản xuất, hai chữ số tiếp theo là năm sản xuất.

## 14. THIẾT BỊ NÓI TRÊN ĐÃ ĐƯỢC DÙNG

Mẫu thiết bị nói trên đã được dùng và thử nghiệm để cấp dấu CE theo một Chỉ thị của châu Âu và theo các tiêu chuẩn:

- Chỉ thị 2014/35/EU về Điện áp Thấp
- Chỉ thị 2014/30/EU về Độ tương thích Điện từ.

## 15. THÔNG TIN VỀ BẢO HÀNH

Thời gian bảo hành là 2 năm tính từ ngày mua thiết bị và 6 tháng đối với các đầu tắm tiêu chuẩn. Chế độ bảo hành này không áp dụng với bất kỳ trường hợp hỏng hóc nào do sử dụng sai cách. Khi phát hiện có lỗi sản xuất trong thời gian bảo hành, bộ phận hỗ trợ sẽ được sửa chữa hoặc, nếu không thể sửa chữa, được thay thế bằng một bộ phận khác. Chế độ bảo hành này không bao gồm các bộ phận và bộ phận tiêu hao để bộ mài mòn và pin, túi đựng và bao bì của máy.

Phiên bản: 2022-W35

**B.Well Swiss AG**  
Banhofstrasse 24  
9443, Widnau, Thụy Sĩ