

Li Naudojimo instrukcija

Dekojame, kad įsigijote „B.Well“ burnos irrigatorių PRO-911.

Prietaisas efektyviai išvalo dantų tarpus ir pašalina apnasas. Jis padeda apsaugioti nuo dantų apnari ir ėduolių bei dantų uždegimų. Burnos irrigatorius PRO-911 yra būtinis burnos priežiūros prietaisas, jei nesilaisote dantų tūtu, implantus, vainikielius ar kabes. Juo taip pat galima masažuoti dantenas, kas gerina kraujotaką ir skatina dantų gijimą. Trys veiksmos užtikrina optimalų valymo efektyvumą.

1. ATSARGUMŲ PRIEMONĖS

- ĮSPĖJIMAS** Su burnos irrigatoriumi niekada neaudokite:
 - Medžiagų ar tirpalų su struktūromis suspensijos ar užplūdo dalelėmis. Tokios dalelės gali užkimšti prietaiso ir jo angalo kanalus.
 - Tirpalų su aliejais. Organinis aliejus paslygtų tarpinėmis sąlymėmis ir gali pažeisti prietaiso kanalus bei kitus komponentus.
 - Sierpų cheminį medžiagų (pvz. kalcio permanganato, jodo ir kt.) tirpalų
 - Dantų pastos.
 - Druskų tirpalų.

Su burnos irrigatoriumi naudokite:

- Svarų drungną vandens (iki 40 °C). Jei vandentekio vanduo prastos kokybės, naudokite filtruotą vandenį.
- Joristas ar specialiai burnos irrigatoriaus skirtus skalavimo šūdinus (šūdinis būtinai maišyti tam tikru santykiu su vandeniu. Rekomenduojamas santykis nurodytas skalavimo šūdinių gamintojo instrukcijoje).
- Angaliai (bioreakcijos, miramistina ar kitus gydytojo paskirtus antiseptikus vaistus).

- ATSARGIAI!** Jei naudosite įrešius ar specialiai burnos irrigatoriaus skirtus skalavimo šūdinus, kiekvieną kartą po naudojimo atlikite šią irrigatoriaus praskalavimo procedūrą: įjunkite ir irrigatorių drungno vandens, įjunkite ir palaikite, kol visas vanduo ištekės per irrigatoriaus angali. Atlikite ypatingą demerį į tirpalą galinčio laukį. Niekada neaudokite pasibaigusio galiojimo tirpalų.

2. ATSARGIAI!

- Prietaisą yra integruota maitinimo baterija. Nemeskite jos įgri, neakinkite ir nebandykite atskirti įreai. Nepalikite prietaiso aukštes temperatūros aplinkoje.

- Pastebėję adapterio laidą ar kšluko pažėdimą, adapterio neaudokite.

3. ATSARGUMŲ PRIEMONĖS:

- Neaudokite prie įrovkioji prietaiso prietaiso vonioje ar duše.
- Nelaukykite ir niekada nepalikite įrovkiojo adapterio vietoje, kur jis gali nukristi ar patekti į vandenį. Tai gali sukelti elektros smugį ar gaisrą.
- Nebandykite iškart ištukėti į vandenį įterpusio irrigatoriaus. Pirmiausia atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Nebandykite panaudinti irrigatoriaus į vandenį.
- Niekada neaudokite prietaiso su pažaisu ar netinkamai prie elektros tinklo prijungtu įrovkiojo adapteriu. Tai gali sukelti elektros smugį, trumpąjį jungimą ar gaisrą.
- Niekada nelaukykite, nesuokkite ir netampykite elektros laido. Nėdėkite sunkių daiktų dangi ar elektros laidą ir nėdėkite laidu tarp tokių objektų. Tai gali sukelti elektros smugį ar gaisrą.
- Nebandykite panaudinti įrovkiojo adapterio į vandenį ir niekada jo nepalikite vandens. Tai gali sukelti elektros smugį ar trumpąjį jungimą.
- Niekada neaudokite prijungti adapterio laidą prie elektros tinklo (ar atjungti nuo jo) šlapiomis ar drėgnomis rankomis. Tai gali sukelti elektros smugį.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei nesilaikysite šio nurodymo, gali įvykti nelaimingi atsitikimai ar nutikti pavojingos situacijos, pvz., vaikas gali netęti įvairių mazių preizės dalelių.
- Reguliarai laikykite laidą ištęsiu ir įrovkioji adapterį nuo dulkių ir purvo. Jei nesilaikysite šio nurodymo, gali būti elektros laidų ir galvutės elektros laidų ir gali kilti gaisras.
- Prieš vikiydami bet kokius prietaiso ar jo priedų priežiūros darbus, atjunkite irrigatorių nuo elektros tinklo. Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite patirti elektros smugį.
- Kiekvieną kartą naudodami prietaisą pasitikinę, kad jo būtų matinamas ir atitinkami charakteristinės elektros triksio. Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite patirti elektros smugį ir gali kilti gaisras.
- Niekada nebandykite patys modifikuoti, ardyti ar taisyti prietaisą. Tai gali sukelti gaisrą, elektros smugį ar kitąjį jos sužaloj. Jei prietaisą būtina remontuoti (pvz., reikia pakeisti integruotąjį bateriją), susisiekiute su įgalintoju „B.Well“ priežiūros centru.
- Nelaukykite prietaiso vietoje, kur jis gali nukristi (pvz., ant kriauklės).
- Neaudokite prietaiso be angalių.
- Neaudokite prietaiso prijungto prie elektros tinklo.

4. ĮSPĖJIMAI

- Nesilaikę prietaisu naudotis vaikams ar jo tinkamai valdyti nepajėgiems asmenims, taip pat asmenims su nusilpusiais burnos ertmės pojūčiais. Jei nesilaikysite šio nurodymo, tokie asmenys gali susižaloti.
- Dei mažai daži nurijimo pavojaus angalius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisą naudokite tik burnos ertmės valyti. Jei irrigatoriaus vandens srovę nukreipsite į akis, nosį, ausis ar gerklę, galite rimtai susižaloti. Jei gydytės dantis ar sergate sunkia paradontozės forma, prieš naudodami prietaisą būtinai pasikonsultuokite su savo odontologu.
- Jei jums skauda dantis ar dantenas, irrigatoriumi naudokites atsargiai arba nesinaudokite visduktai. Rekomenduojame pasikonsultuoti su odontologu.
- Naudodami irrigatorių nepaspauskite į angalią prie dantų, kad jų nepažeistumėte.
- Niekada nepilkite į prietaisą, aukštesnės nei 40 °C temperatūros vandens.
- Norėdami ištraukti įrovkiojį ir elektros tinklo laidą, laikykite už kšluko, o ne už laidą. Jei nesilaikysite šio nurodymo, galite patirti elektros smugį, sukelti trumpąjį jungimą arba gaisrą.
- Prietaisą laikykite švarų, naudokite tik šviežią ir drungnų vandenį iš čiaupo. Kai kurių tipų šūdinių prietaisą galite sugadinti. Todėl atkreipkite dėmesį į draudžiamą naudoti šūdinių sąrašą.
- Kai baigsite naudoti prietaisą, išdėkite šūdinį vandenį ir irrigatoriaus į pakaitelį į įjungtą 2-3 sekundes, kad ištekėtų visis vandens likučiai. Jei nesilaikysite higienos taisyklių, prietaisai gali atsirasti pelės ir kauptis bakterijas, galintys pakenkti sveikatai. Taip pat bakterijos gali sukelti blogą kvapą ir sukelti gedimų.
- Irrigatorių naudokite tik jei uždujarys jo įrovimo lizdo dangtelis, kitaip prietaisas gali veikti netinkamai ar greičiau išsiskirti.
- Prietaisu neleiskite naudotis vaikams, ribotų judėjimų ar protinio gebėjimų ir reikiamos patirties neturintiems asmenims, nebent jie būtų prižiūrimi už jų saugumą atitinkamo asmens ir gautų tikslus naudojimo nurodymus.
- Pasitvirtinkite, kad valkai nežaišų su prietaisu.

2. NAUDOJIMO PASKIRTIS IR KONTRINDIKACIJOS

Burnos irrigatorius PRO-911 su predaus yra skirtas rūpinis dantų ir dantų higiena bei visapusišką jų priežiūrą, gydyti dantų ligas ir jų išvengti. Burnos irrigatoriaus šalinimo galimybių l bet kurių burnos ertmės srityje nukreipti vandens ar medicinio tirpalo srovę. Apsaugo nuo patogeninės mikrofloros ir uždegiminių procesų. Naudojimo irrigatorių laikykites gydytojo nurodymų.

Naudojimo paskirtis

Burnos irrigatoriaus PRO-911 su priedais naudojami paskirtis:

- burnos ertmės ligų gydymas ir prevencija (pvz., gingivito, periodonto, perimplantito, dantų kraujavimo ir kt.);
- dantų audinių ir visos burnos gleivinės medicininis drėkinimas ir masažas;
- prevencija nuo dantų ėduoliams ar apnarių susidarymo;
- visapusiška burnos ertmės priežiūra, įskaitant burnos ertmės tarpdantis ir dantų vagelės bei kšienes;
- efektyvus ortodontinis ir ortopedinis valymas.

Kontraindikacijos:

Chirurginės intervencijos burnos ertmėje atvytu ar paūmėjus lėtinės burnos ertmės ligoms, prieš naudodami irrigatorių pasikonsultuokite su odontologu.
Pradžioje naudodami irrigatorių dantenas gali šiek tiek kraujuoti. Jei dantenos sveikos, kraujavimas turėtų laipsniškai per 1-2 savaites. Jei kraujavimas tęsiasi po 2 savaičių ir kraujoties į kraujoties į odontologą.
Neaudokite antibiotikus, jei turite atvirų lėduviu ar burnos ertmės žaizdų.
Jei vartojate antibiotikus, pasikonsultuokite su gydytoju.

3. TIEKIMO APIMTIS


- Burnos irrigatorius.
- Standartiniai angaliai (2 vnt.).
- Vandens indas.
- USB laidas.
- Įrovimo lizdo dangtelis.
- Vandens išspausus krepselis.
- Naudojimo instrukcija.
- Garantijos kortelė.
- Dėžutė.

- PASTABA:** Naupo irrigatoriaus vandens indo vidus ir vidiniai kanalai gali būti drėgni. Taip gali būti dėl to, kad valykite atliekamą irrigatorių bangomis naudojant savąjį distiliuotą vandenį.

„B.Well“ irrigatoriui PRO-911 papildomai galite įsigyti angalių rinkinį.

Δ SVARBU! Siekiant užtikrinti asmeninę higieną, kiekvienam šeimos nariui rekomenduojame naudoti atskirą angali. Šiuo tikslu angaliai pažymėti skirtingomis spalvomis.

STANDARTINIAI PRO-911 irrigatoriaus angaliai

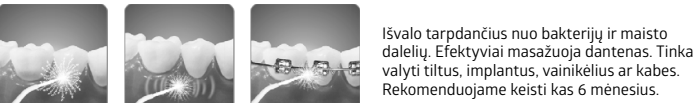

ORTODONTINIS PRO-911 irrigatoriaus angalis

Idealiai tinka valyti tūtu, kabes ir vainikielius. Veiksmingai išvalo visus distiliuotus elementus.
Rekomenduojame keisti kas 6 mėnesius.

PRO-911 irrigatoriaus LIEŽUVIO angalis

Tinka kasdienę valyti liežuvį. Pašalina bakterines apnasas ir atgaivina burnos kvapą. Rekomenduojame keisti kas 6 mėnesius.

PERIODONTINIS PRO-911 irrigatoriaus angalis

Skirtas valyti dantų pakraščius ir kšienes, taip pat protezų paviršius ir dantų tūtu.
Rekomenduojame keisti kas 6 mėnesius.


PRO-911 IRRIGATORIAUS ANGALIAI IMPLANTAMS, TILTAMS, VAINIKĖLIAMS IR LAMINATEMS

Skirtas subtiliai išvalyti implantų, tiltų, vainikėlių ir laminatų paviršius.
Rekomenduojame keisti kas 6 mėnesius.

PRO-911 irrigatoriaus NOSIES angalis

Skirtas valyti ir skalauti nosies ertmes.
Rekomenduojame keisti kas 6 mėnesius.

PRIETAISO PARUOŠIMAS

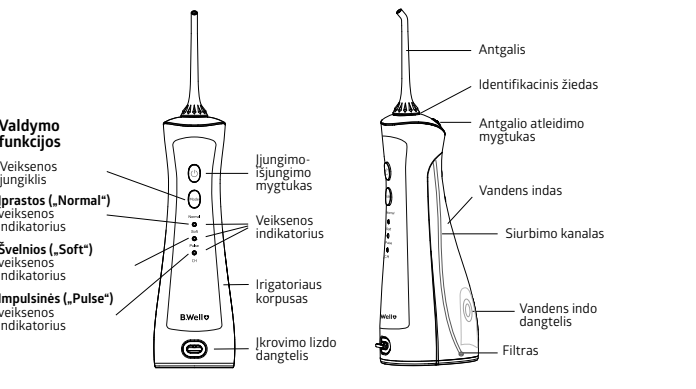

- PASTABA:** prieš pirmą kartą naudodami, prietaisą įtraukite įrovimo metu prietaisą naudoti draudžiamame.
- Paspauskite pirmąjį išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą. Paspauskite veiksmų jungiklį, kad pasirinktumėte pageidaujamą vandens srovę tipą (įprasta, švelni, impulsinė).
- Pasirinkta veiksmas bus nurodytas veiksmo indikatoriu. Norėdami pasirinkti kitą veiksmą, paspauskite veiksmų jungiklį vėną ar du kartus. Paspauskite veiksmų jungiklį veiksmą pakeisite iš įprasto į švelnią, o tada į impulsinę.

Veiksmos aprašymas

- Pateiktus veiksmų pakeičius vandens srovės slėgis, o prietaiso sonatinė skydelyje jų atspindės atitinkamais indikatoriais.
- Įprasta („Normal“)** veiksmas skirta efektyviai valyti dantis ir pašalinti maisto likučius.
- Švelni („Soft“)** veiksmas skirta švelniai valyti jautrius dantis ir dantenas.
- Impulsinė („Pulse“)** veiksmas skirta valyti ir masažuoti dantenas.
- Įrovimas („CP“)** irrigatoriaus įrovimo metu pakaitomis miksėvis virdinasi. Kai irrigatoriaus įrovimas, įjungus ir švies vis indikatoriai.

5. PRIETAISO ĮKROVIMAS

Norėdami įkrauti prietaisą, naudokite priedamą USB laidą. Adapteris netiekiamas. Niekada įrovkiojo laidą dangtelį, prijunkite USB laidą, o j prie įrovkio, šorinės baterijos ar kito tinkamo elektros maitinimo šaltinio. Taip pat galite naudoti litą „Micro“ USB įrovkį. Naudokite tik sertifikuotus 5 V, 1.000 mA DC įrovkiolius.

Įrovkiojus įrovimo metu pakaitomis miksėvis vis prietaiso šonini skydelio indikatoriai. Kai irrigatoriaus įkėras, įjungus ir nuot vis vis indikatoriai. Kai naudotumėsite irrigatorių pasibašies mirksinti indikatorius – laikas prietaisą įkrauti. Bėgus įrovimo užbaigėsis įrovimo lizdo dangtelį.

6. PRIETAISO NAUDOJIMAS

- Pasirinkite angali ir įstatykite į irrigatoriaus viršų. Norėdami nūmti angali, paspauskite jo atidėimo mygtuką ir patraukite angali į viršų.
- Pripildykite vandens indą. Tai galite padaryti kelias būdas.

