

WT-03 BASE WT-04 STANDARD WT-06 FLEX

DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ



HU Használati útmutató

BEVEZETÉS

Tisztelt fogyasztó!
Gratulálunk Önnek a B.Well digitális lázmérő megvásárlásához! Köszönjük, hogy a termékünket választotta!

RENDELTETTÉ

A lázmérők a testhőmérséklet szájon át, hónaljban és végbélben történő mérésére szolgálnak.


ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A lázmérő kizárólag a testhőmérséklet mérésére használható!
 - Minden esetben be kell tartani a minimális mérési időt, amely a sípoló hangjelzés megszólalásáig tart!
 - Gondoskodjon arról, hogy gyermekek ne használják a lázmérőt felügyelet nélkül, mivel egyes alkotórészei elég kicsik ahhoz, hogy lenyeljék azokat.
 - Óvja a lázmérőt a külső behatásoktól és a leeséstől!
 - A hegyét ne hajlítsa meg 45°-osnál nagyobb szögben!
 - Ne tárolja 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten!
A lázmérőt SOHA ne forrázza le!
 - A lázmérő tisztításához kizárólag a „Tisztítás és fertőtlenítés” c. pontban felsorolt kereskedelmi fertőtlenítőszeret használja.
 - Az elemek és az elektronikai eszközök a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, nem szabad azokat a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni.
- A hőmérsékletmérés eredménye minden körülmények között CSAK összehasonlítási alapként szolgál. Mielőtt bármilyen gyógyászati lépésre kerülne sor, forduljon orvoshoz.

MIT ÉRTÜNK „NORMÁLIS” TESTHŐMÉRSÉKLET ALATT?

Noha az általánosan elfogadott „normális” testhőmérséklet 36,6 °C, a 35,2 °C és 36,8 °C között ingadozó értékek még „normálisnak” számítanak. A testhőmérsékleti ingadozások különböző tevékenységeknek, például testmozgásnak, dohányzásnak, evésnek és ivásnak tulajdoníthatók. A testhőmérsékletünk reggel alacsonyabb, mint délután. Egyéb ingadozások a mérés helye miatt is előfordulhatnak: **axilláris** (hónaljban végzett mérés), **orális** (szájüregeben végzett), **rektális** (végbélben végzett mérés). A hónaljban mért testhőmérséklet megfelel a fenti irányutmutásoknak, azonban a szájüregeben mért testhőmérséklet általában 0,5 °C-kal magasabb annál. A végbélben mért érték 1,0 °C-kal magasabb.

A DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ JELLEMZŐI

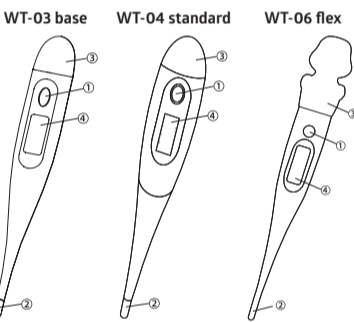

1. ON/OFF (BE/KI) kapcsológomb
2. Mérőhegy
3. Elemtartó fedele
4. Kijelzőablak

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- 1. módszer.** Tisztítsa meg a lázmérőt egy puha kendővel és vízzel hígított izopropil-alkohollal.
- 2. módszer.** Mossa meg szappanos meleg vízzel, majd törölje át egy tiszta, nedves kendővel, és hagyja megszáradni.
- 3. módszer.** Tisztítsa meg a lázmérőt puha, alkohollal átitott, nedves kendővel (lehetőleg injekcióhoz használatos kendővel).

A LÁZMÉRŐ ELŐKÉSZÉSE A HASZNÁLATRA

Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a lázmérőt. Az eszköz sípoló hangjelzést bocsát ki, és a kijelzőn megjelenik az összes szegmens kb. 2 másodpercig.

WT-03: Ezután a lázmérőn megjelenik a testhőmérséklet, amely 36,5 °C.

WT-04 and WT-06: A kijelzőn megjelenik az utóljára mért hőmérséklet. Utána 1 másodpercig megjelenik a testhőmérséklet, amely 37,0 °C. Ha a szobahőmérséklet $\geq 32,00\text{ °C}$, akkor a kijelzőn „Lo°C” felirat jelenik meg.

WT-03: Ha a szobahőmérséklet $\geq 44,0\text{ °C}$, akkor a kijelzőn „Hi °C” felirat jelenik meg.

WT-04, WT-06: Ha a szobahőmérséklet $\geq 43,0\text{ °C}$, akkor a kijelzőn „Hi °C” felirat jelenik meg. Amikor megjelenik a „C” felirat, akkor a lázmérő készen áll a testhőmérséklet mérésére.

WT-03: Az utóljára mért testhőmérséklet megtekintéséhez nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva az ON/OFF gombot.

HOGY KELL MEGMÉRNI A TESTHŐMÉRSÉKLETET?

- **Testhőmérséklet mérése hónaljban.**
Száras törülközővel törölje meg a hónalját, majd helyezze be a mérőhegyet.

⚠ Figyelem! A testhőmérséklet hónaljban végzett mérésekor az erős verejtékezés hibás mérési eredményt idézhet elő. A testhőmérséklet hónaljban végzett mérésekor a karját tartsa szorosan a törse mellett annak érdekében, hogy a karja a mérőhegyet megfelelően lefedje. A hónaljban mért testhőmérséklet 35,2 és 36,8 °C között ingadozhat. Orvosi szempontból a testhőmérséklet hónaljban végzett mérés nem igazán pontos mérési módszer. A pontos értéket megméréséhez a mérőhegynek stabilan érintkeznie kell a testtel. Ha a mérőhegy nem érintkezik megfelelően a bőrrel, a lázmérő hamarabb sípol, és a mért érték alacsonyabb.

- **Testhőmérséklet mérése szájüregeben.**

Helyezze a mérőhegyet a nyelve alá, a lehető legközelebb a nyelvgyök egyik oldalához. A mérés közben tartsa csukva a száját. A szájüregeben mért testhőmérséklet 35,7 és 37,3 °C között ingadozhat.

⚠ Figyelem! SA testhőmérsékletet növelhetik vagy csökkenthetik különböző tevékenységek, például forró vagy hideg ital fogyasztása, a dohányzás vagy a testmozgás. Ezért fontos, hogy a testhőmérséklet szájüregeben végzett mérése előtt kb. 5 percig lazítson csukott szájjal.

- **Testhőmérséklet mérése végbélben.**

A mérőhegy burkolatát kenje be vízben oldódó síkosítószerezrel. A mérőhegyet óvatosan helyezze be a végbélbe (kb. 1 cm mélységgel). A végbélben mért testhőmérséklet 36,2 és 37,7 °C között ingadozhat.

A mérési idő átlaga a különböző mérési módszerek alkalmazásakor

	WT-03	WT-04	WT-06
Hónaljban	2-3 perc	50-60 másodperc	20 másodperc
Szájüregeben	1 perc	40-50 másodperc	10-15 másodperc
Végbélben	1 perc	30-40 másodperc	6-10 másodperc

A hónaljban végzett mérés hosszabb ideig tarthat a fent ismertetett jellemzők miatt. Ha a testhőmérséklet enyhén emelkedik, a lázmérő sípoló hangjelzést bocsát ki.

⚠ Figyelem! A sípoló hangjelzés nem jelenti azt, hogy a mérés befejeződött. Csak azt jelzi, hogy a testhőmérséklet enyhén emelkedik. Javasolt a lázmérő benntartása 30-60 másodpercig a sípoló hangjelzés után.

Sípoló hangjelzések meghatározása:

	WT-03	WT-04	WT-06
Rövid	$t \geq 37,5\text{ °C}$	$t \geq 37,8\text{ °C}$	$t \geq 37,8\text{ °C}$
Hosszú	$t < 37,5\text{ °C}$	$t < 37,8\text{ °C}$	$t < 37,8\text{ °C}$

Az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében használat után kapcsolja KI a lázmérőt az ON/OFF gomb megnyomásával. A lázmérő automatikusan kikapcsolódik kb. 10 perc elteltével.

ⓘ Megjegyzés: A higiéniai előírásoknak megfelelően a végbélben végzendő méréshez ne használja ugyanazt a lázmérőt, amelyiket hónaljban vagy szájüregeben végzett méréshez is használta. Közvetlenül a testhőmérséklet mérése előtt ne fogyasszon forró vagy hideg italt, ne végezzen testmozgást, ne dohányozzon és ne zuhanyozzon.

A LÁZMÉRŐ ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSA

- A lázmérőt gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Ne gyalogoljon, szaladjon vagy beszélgessen a testhőmérséklet mérése közben.
- Minden egyes mérés előtt és után törölje meg a lázmérőt. Amikor a lázmérőt nem használja, tartsa a védőtokjában.
- Ne rágszálja a mérőhegyet!
- A lázmérőt ne tárolja közvetlen napfénynek kitétt, poros vagy nyirkos helyen. Ne tárolja szélsőséges hőmérsékleten!
- Űgyeljen arra, hogy a lázmérő ne essen le és ne érje erős ütést.
- Az elemcsere kivételével ne próbálja meg a lázmérőt szétszedni!

Ha a kijelzőn „ERROR” (HIBA) felirat jelenik meg, és a mérés nem indul el, forduljon egy szervizközpontozhoz.

ⓘ Megjegyzés: A lázmérőben kár keletkezhet, ha:

- azt a hőmérsékletre és páratartalomra vonatkozóan meghatározott határértékeken kívül használják és/vagy tárolják;
- az leesett, vagy mechanikai sérülés érte.

⚠ Ellenjavallatok: nem ismertek.

AZ ELEM CSERÉJE

A digitális lázmérőben ki kell cserélni az elemet, amikor a kijelző jobb alsó sarkában megjelenik a „” vagy „” jelzés.

Az elemcseréhez:

1. Az elemtartó fedelét csavarja KI (csak a WT-06 típus esetében).
2. Vegye le az elemtartó fedelét a lázmérőről.
3. Cserélje ki az elemet.
4. Az elemtartó fedelét tegye vissza a helyére.

ⓘ Megjegyzés: Az elemet gyermekektől elzárva tartsa. Ne tárolja az elemet magas hőmérsékleten.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	WT-03	WT-04	WT-06
Mérési tartomány	32,0 °C - 42,9 °C	32,0 °C - 42,9 °C	32,0 °C - 42,9 °C
Kijelző felbontása	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Pontosság	+0,1 °C-os pontosság 35,5 °C - 42,0 °C közötti mérési tartományánál +0,2 °C-os pontosság 35,5 °C-nál alacsonyabb és 42,0 °C-nál magasabb mérési tartományánál		
Automatikus kikapcsolás	10 perc +2 perc	8 perc 40 másodperc +2 perc	10 perc +2 perc
Elem	LR41 / SR41	LR41 / SR41	LR41 / SR41
Elem élettartama	Min. 1 év	Min. 1 év	Min. 1 év
Készülék mérete	128,1 x 18,5 x 10,5 mm	133 x 21 x 11 mm	148 x 22 x 20 mm
Súly (elemmel együtt, tok nélkül)	kb. 10 g	kb. 10 g	kb. 14 g
Üzemi feltételek	Hőmérséklet: 10-40 °C; relatív páratartalom: 30-85%		
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: -10-60 °C; relatív páratartalom: 25-90%		

LÁZMÉRŐKÉSZLET

1. Lázmérő
2. Elem
3. Használati útmutató és jótállási jegy
4. Védőtok

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS

A készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően, a háztartási hulladéktól elkülönítve kell használni. A készülék hasznosítása érdekében forduljon a hulladékhasznosításra engedéllyel rendelkező szervezethez.

MEGFELELŐSÉG

A lázmérő megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EKG irányelvben foglalt előírásoknak. Megfelelőségi nyilatkozat.

KARBANTARTÁS

Ajánlott a teljesítményt minden alkalommal ellenőrizni 2 évvel vagy azt követően, hogy elejtették. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizelő központtal.

ⓘ Megjegyzés: A lázmérő pontosságát Ön is ellenőrizheti. Öntsön egy edénybe (300-500 ml) 36 és 41 °C közötti meleg vizet. Helyezzen bele két vagy több lázmérőt, köztük azt, amelyiket ellenőrizni kíván, és egy másikat az összehasonlításhoz.

A mérőhegyek egyformán 2-3 cm mélyen legyenek a vízben. 1-2 perc elteltével hasonlítsa össze a mért számokat. A különbség nem lehet 0,1 °C-nál több vagy kevesebb.

JÓTÁLLÁS

A jótállási idő a vásárlás dátumától számított 2 év. Ez a jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat okozta károkra, valamint az elemre és a csomagolásra. A jótállási időszak alatt feltárt gyártási hiba esetén a hibás készüléket megjavítják, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélik. *A gyártás dátumát a készüléken az SN sorszám jelzi: WYYYYXXXX. Az első és a második számjegy (WW) a gyártás hete, a harmadik és a negyedik szám (YY) a gyártás éve.*

ⓘ Szükség esetén a gyártó előzetes értesítés nélkül módosíthatja a készülékek részeit vagy egészét.

SZIMBOLUMOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

	HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT		ÁRTALMATLANÍTÁS SZELEKTÍV GYŰJTÉSHEZ
	BURKOLAT BEHATÓLÁS ELLENI VÉDELMI BESOROLÁS: IP22 (Védett a 12,5 milliméternél nagyobb méretű szilárd testek behatolása ellen. Védett a függőlegesen eső vízcsöpek behatolása ellen)		BF TÍPUSÚ KÉSZÜLÉK
	GYÁRTÓ NEVE		CIKKSZÁM
	CE-JELÖLÉS		GYÁRTÁSI SZÁM
			HŐMÉRSÉKLET ÜZEMI ÁLLAPOTBAN
			HŐMÉRSÉKLET TÁROLÁSI ÁLLAPOTBAN

Értékesítés dátuma:

Értékesítő bélyegzője:

Utolsó felülvizsgálat: 2020-W44

B.Well Swiss AG
Bahnhofstr. 24, 9443 Widnau, Svájc.
www.bwell-swiss.ch