


1. المقدمة

شكراً لك على شراء شفاط الأنف WC-150 من شركة B.Well. شفاط الأنف من شركة B.Well قادر على العمل بقدرة شديدة للحفاظ على الأنف نظيفاً وخالياً مقارياً بالشفاط التقليدي المصنوع من المطاط. هذا الجهاز مُصمّم لتشغيل أكثر أماناً وسهولة وصغير الحجم للاستخدام المنزلي وخلال السفر.

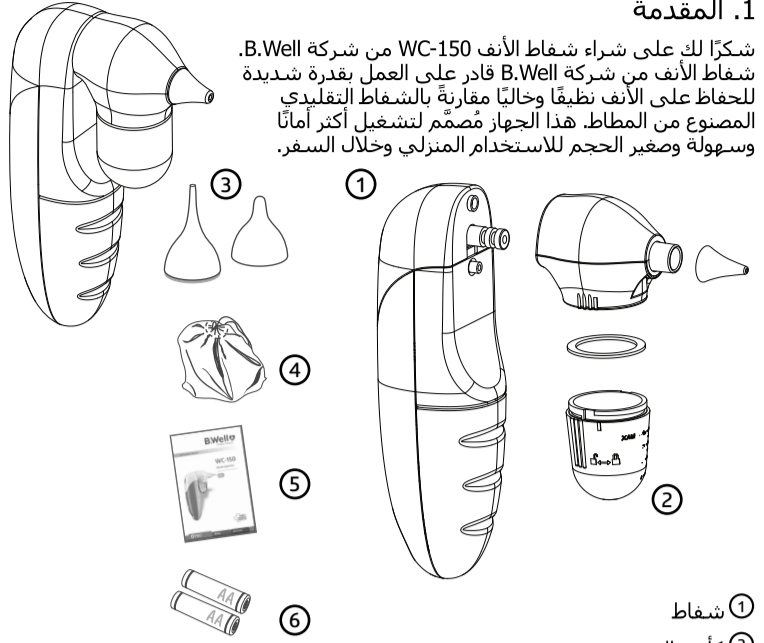

- 1 شفاط
- 2 كأس التجميع
- 3 اطراف سيليكون(2قطعة)
- 4 حقبيه للتخزين والنقل
- 5 كتيب تعليمات
- 6 عدد 2 بطارية أيه 1.5 فولت

2. خصائص المنتج

1. قدره شديدة:

ضع طرف الشفط في فتحة الأنف، حينها يمكنك استخدام هذا الجهاز لإزالة إفرازات الأنف بصفة مستمرة أو متقطعة.

2. أمن:

يعمل طرف الشفط اللين ذو التصميم المريح على منع احتمالية إصابتك عند استخدام هذا الجهاز.

3. تصميم صغير الحجم وسهل:

الجهاز صغير الحجم وسهل الحمل والتشغيل. كما أنه آمن ومريح لاستخدامه لدى الأطفال.

4. البطارية:

يحتاج هذا الجهاز الى عدد 2بطارية من نوع أيه 1.5 فولت ويمكن تغيير البطارية بسهولة في أي وقت وأي مكان. مؤشر انخفاض البطارية

5. الموسيقى:

بدلاً من الصوت الممل/المرجع عند استخدام الجهاز، يقدم جهازنا التصميم الفريد للنغمات و12 أغنية من أغاني الأطفال على مستوى العالم. مع الأغاني الجميلة، سيسهر طفلك براحة أكثر عند التعامل مع هذا الجهاز.

6. رأس شفط قابل للغسل:

يُمكن تفكيك الأطراف وكأس التجميع وجزء الرأس من الجهاز وغسلهم. كما يُمكن تطهير كأس التجميع باستخدام الماء المغلي.

3. الأغراض المخصّصة

صُمِّم هذا الجهاز لاستخدام الشفط المتقطع لإزالة إفرازات ومخاط الأنف لدى الأطفال (من عمر 0-12 عاماً) في المنزل.


4. موانع الاستعمال

1. لا تدفع الطرف بعمق داخل فتحة أنف الطفل. استخدم شفاط الأنف وفقاً للتوجيهات الموصى بها. يرجى جعل فتحة الأنف باتجاه الأسفل.
2. من أجل سلامة الطفل، لا يزيد وقت الشفط عن ثوانٍ قليلة.
3. لا تستخدم شفاط الأنف في حالات تهيج الأنف أو الزيف.
4. في حالة الإصابة بعدوى أو حمى أو تهيج الأنف أو زيف، يُرجى استشارة الطبيب.
5. لا تستخدم شفاط الأنف من دون طرف السيليكون أو بكأس تجميع متهاك.
6. اغسل طرف السيليكون أو كأس التجميع بعد كل استخدام.
7. اغسل يديك قبل استخدام شفاط الأنف وبعد استخدامه.

5. الإجراءات الوقائية

1. لا تُحر أي تعديل في هذا الجهاز دون تصريح الشركة المصنّعة.
2. لا تُعرّض الجهاز لدرجة حرارة مرتفعة أو لمستوى شديد الارتفاع من الرطوبة أو لضوء الشمس المباشر.
3. تجنّب الضغط الشديد أو الصدمات أو سقوط الجهاز دون قصد.
4. لا تغسل جسم الجهاز بالماء أو أي نوع من السوائل. يُوصى بشدّة بمسح الجهاز بقطعة قماش ناعمة والحفاظ على الجهاز نظيفاً.
5. يُرجى استبدال البطاريات عندما تنخفض قدرة التشغيل و/أو صوت المضخة أثناء تشغيل الجهاز.
6. يوصى بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم الجهاز لفترة من الوقت.
7. استخدم ضغط الجهاز على نحو منقطع. يجب أن تستمرّ بالضغط على زرّ التشغيل لبدء تشغيل الجهاز لإحداث هواء من أجل إزالة إفرازات ومُخاط الأنف. إذا أردت إيقاف الشفط، فقط حرّر زر التشغيل لإيقاف الجهاز.
8. شفاط الأنف مخصّص لتنظيف/إزالة مخاط الأنف فقط. لا تستخدم هذا الجهاز في غير الأغراض المخصّصة. يجب أن يتبع أي إجراء طبي آخر نصيحة الأطباء.
9. أثناء استخدام الجهاز، لا يجب أن يحبس الطفل نفسه أو يُغلق فمه أو يتلعّب لعابه لتجنّب تسبّب ضغط الهواء في إحداث عدم اتزان في طبلة الأذن.
10. إذا لم يشعُر الطفل بتحسّن عند استخدام شفاط الأنف، توقف فورا واستشر الطبيب.
11. لا تستخدم قوة مُفرطة عند وضع طرف الشفط داخل فتحة الأنف.
12. الجهاز مخصّص للاستخدام المنزلي فقط. يُرجى استشارة طبيبك في حالة وجود أمراض بالأنف. قم بتنظيف طرف الشفط قبل كل استخدام.
13. شفاط الأنف ليس لعبة. فقط المعنوبون بتشغيل هذا الجهاز هم الوالدين أو البالغين القادرين على اتباع التعليمات والتنبيهات الواردة في كتيب التعليمات لتشغيل الجهاز. لا يُسمح للأطفال باستخدام الجهاز بأنفسهم .
14. لا تستخدم شفاط الأنف للمرضى ذوي الموانع التالية:
 - نزيف بالأنف أو حروح مفتوحة بداخلها
 - إصابة شديدة بالرأس أو الوجه أو الرقبة
 - تخثر أو اضطراب النزيف
15. قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة كتيب التعليمات بعناية. قد يتسبب سوء استخدام الجهاز الى المخاطر أو المشاكل التالية:
 - صدمه ميكانيكيه
 - تهيج/نزيف الأنف
 - نزيف بالغشاء المخاطي
 - انزعاج وألم

Ⓛ ملاحظه: استخدم فقط اطراف مجموعة B.WELL WC مع جهاز شفط الأنف. يرجى الاتصال ببناع التجزئه لشراء هذه الملحقات

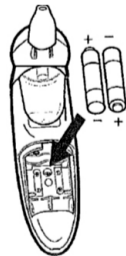

6. تركيب البطاريات

1. أزل غطاء البطارية كما هو موضح.
2. أدخل 2 بطارية قلووية 1.5 فولت حجم AA بتوصيل الإيجابي (+) بالإيجابي (+) والسلبى (-) بالسلبى (-).
3. اضغط البطاريات للأسفل للتأكد من دخولها بالكامل.
4. استبدل غطاء البطارية كما هو موضح.

Ⓛ ملاحظه :

- عند تغيير البطاريات، استخدم بطاريات من نفس النوع والتكوين والقدرة
- استبدل دائماً البطاريات في نفس الوقت
- لا تستخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن
- استخدم البطاريات الخالية من المعادن الثقيلة
- تخلّص من البطاريات المُستخدَمة وفقاً للوائح القانونية المعمول بها. لا تتخلّص من البطاريات في النفايات المنزلية العادية

7. تعليمات المنتج

1. اختر الطرف الصحيح للاستخدام، وفقاً لشكل وحجم فتحتي أنف طفلك.
 - يُوصى باستخدام الطرف الواسع حينما يكون قوام المخاط أكثر لابة
 - يُوصى باستخدام الطرف الضيق عندما يكون المخاط رخواً وفي شكل سائل
2. تأكد من وضع الطرف بأمان في الشفاط. تأكد من تركيب الطرف بالكامل فوق الجزء الموعج. قبل الاستخدام
3. ضع طرف الشفط داخل فتحة الأنف.

4. اضغط باستمرار على زرّ التشغيل للسماح للشفط بتنظيف المخاط.

Ⓛ ملاحظه : قد لا يظهر المخاط في الحال في كأس التجميع.

بعد كل استخدام، يُوصى بإجراء تنظيف سريع للطرف من خلال إزالة الطرف من الوحدة.

5. يُرجى جعل فتحة الأنف باتجاه الأسفل عند استخدام الجهاز ليتمكن الجهاز من العمل بكفاءة. تأكد من تثبيت طرف الشفاط بزاوية 90 درجة. لا تُوجّهه إلى أعلى فتحة الأنف. دع الشفاط يُنظف المخاط. كرّر العملية في فتحة الأنف الأخرى وفقاً للحاجة. حرّر زرّ التشغيل لإيقاف الشفط.

6. إذا أردت تشغيل الأغاني لاسترخاء طفلك، فقط ادفع زرّ بدء الموسيقى.

8. تعليمات التنظيف

عد استخدام هذا الجهاز، ستُحفظ إفرازات الأنف في كأس التجميع. يحتاج المستخدم فقط لتنظيف كأس التجميع والليادة وطرف الشفط في ماء مغلي بدرجة 150 درجة مئوية.

- أفضل الطرف وقطعة الرأس من قاعدة الشفاط من خلال سحبه بلطف بعيداً.
- فوّد كأس التجميع من خلال لقه باتجاه حركة عقارب الساعة.
- تنظيف جسم الجهاز: امسح الوحدة بقطعة قماش ناعمة نظيفة."

Ⓛ ملاحظة : قم بإزالة وحدة الاتصال فوراً بعد استخدام الجهاز. لا تضع جهاز الشفط أفقيًا ما لم يتم فصل كوب التجميع. وإلا فقد يدخل السائل من وحدة الاتصال داخل الجهاز ويسبب تلفاً.

Ⓛ ملاحظه : لا تغسل جسم الجهاز بالماء أو أي نوع من السوائل. لا تُنظف الوحدة بالمذيبات أو المستحضرات الكاشطة

- تنظيف كأس التجميع وقطعة الرأس وطرف الشفط: اغسل كأس التجميع وقطعة الرأس وطرف الشفط بقليل من الصابون الممزوج بالماء لمدة 3 دقائق. ثم اشطف هذه الأجزاء تحت صنوبر الماء الجاري الساخن لمدة 3 دقائق وأتركها تجفّ في الهواء. بعد عملية التنظيف، يجب تعقيم هذه الأجزاء بالماء المغلي.

9. الخصائص

ضغط هواء فَعَال	400 مم زئبق (53.3 كيلوباسكال)
بطارية	قلوية حجم AA 1.5 فولت مستوى ضغط
صوت	75-80 ديسيبل
وزن	250 جم
الأبعاد	93.5x39.9x148 مم
طرف شفط	لّين من السيليكون
محركّ جهد	3V/DC
ظروف التشغيل	درجة الحرارة: +16 درجة مئوية إلى +35° C الرطوبة: حتى 85% (غير تكثيفية)
ظروف التخزين	درجة الحرارة: -25° C درجة مئوية إلى +55° C درجة مئوية الرطوبة: حتى 85% (غير تكثيفية)

10. المعايير المُطبّقة

تم اختبار العينة المقدمة من المعدات المذكورة أعلاه للحصول على علامة CE وفقاً للتوجيه الأوروبي والمعايير التالية:






- توجيه التوافق الكهرومغناطيسي EU/2014/30

11. الضمان

فترة الضمان سنتين من تاريخ الشراء. لا يغطي هذا الضمان أي أضرار ناتجة عن الاستخدام غير السليم، وكذلك البطارية وحقبة التخزين والعبوة والملحقات المرؤدة مع الجهاز والأجزاء المعرّضة للتآكل والتلف العادي. عندما تُكتشف أحد عيوب التصنيع أثناء فترة الضمان، سنُصلح الوحدة المعيبة أو نُستبدل بوحدة أخرى عندما لا يكون الإصلاح ممكناً. يحق للشركة المصنّعة تغيير الوحدات جزئياً أو كلياً عند اللزوم، دون إخطار مسبق.

جد تاريخ التصنيع مرهراً في رقم تسلسلي (SN) على الجهاز: يُشير أول رقمين إلى الأسبوع، والرقمان التاليان إلى آخر رقمين من السنة.

12. معلومات الرمز:

	اتبّع التعليمات قبل استخدام
IP22	معدل حماية الدخول المنزلي: IP22 (محمي من اختراق الأجسام الصلبة بأبعاد أكبر من 12.5 مم. محمي من اختراق قطرات الماء الساقطة رأسياً)
	التخلص من الأجزاء المنفصلة الجهاز من
CE	علامة CE
SN	الرقم التسلسلي ظروف
	التشغيل، درجة الحرارة 16 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية،
	ظروف التخزين، درجة الحرارة -25 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية
	اسم الشركة المصنّعة

المراجعة الأخيرة W08-2022

B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
www.bwell-swiss.ch