

WT-03 BASE WT-04 STANDARD WT-06 FLEX

SKAITMENINIS TERMOMETRAS



LT Naudojimo instrukcija

ĮVADAS

Gerbiamas naudotojau!
Džiaugiamės, kad įsigijote B.Well skaitmeninį termometrą!
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį!

PASKIRTIS

Termometrai naudojami kūno temperatūrai matuoti oraliniu, pažastiniu ir rektaliniu būdu.


ATSARGAUSI PRIEMONĖS

- Termometrą galima naudoti tik kūno temperatūrai matuoti!
- Visais atvejais be išimties termometrą reikia laikyti bent minimalų matavimo laiką iki pasigirstant garsiniam signalui!
- Neleiskite vaikams naudoti termometru be priežiūros; kai kurios dalys yra pakankamai mažos, kad jas galima būtų nuryti.
- Saugokite termometrą nuo smūgių ir kritimo!
- Nesulenkite antgalio daugiau nei 45° kampui!
- Venkite aukštesnės kaip 60 °C aplinkos temperatūros. NIEKADA nevirinkite termometro!
- Termometru valyti naudokite tik skryjuje „Valymas ir dezinfekavimas“ išvardytas dezinfekavimo priemones.
- Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti šalinami laikantis taikytinų vietinių reikalavimų, o ne kartu su buitineis atliekomis.
- **Bet kokiomis aplinkybėmis temperatūros matavimo rezultatas TĖRA TIK informacinio pobūdžio. Prieš atlikdami bet kokius medicininius veiksmus, pasitarkite su savo gydytoju.**

KAS YRA „NORMALI“ TEMPERATŪRA?

Nors visuotinai priimtas „normalus“ temperatūros rodmuo yra 36,6°C, temperatūra gali svyruoti nuo 35,2°C iki 36,8°C ir šie rodmenys taip pat laikytini „norma“. Temperatūros svyravimai gali būti siejami su tam tikra veikla, pavyzdžiui, mankšta, rūkymu, valgymu ir gėrimu. Ryte temperatūra būna žemesnė nei po pietų. Kitus svyravimus gali lemti temperatūros matavimo būdas: pažastinis (pažastyje), oralinis (burnoje), rektalinis (tiesiojoje žarnoje). Pažasties temperatūra atitinka anksčiau pateiktus rodmenis, oralinė temperatūra paprastai yra 0,5°C aukštesnė. Rektalinė temperatūra bus aukštesnė 1,0°C.

SKAITMENINIO TERMOMETRO SAVYBĖS

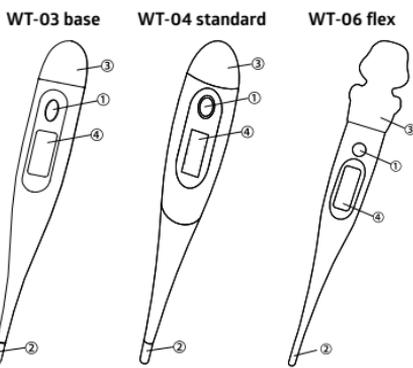

1. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (ON/OFF) mygtukas
2. Zondo antgalis
3. Baterijos dangtelis
4. Ekranas

VALYMO INSTRUKCIJOS

- 1 būdas** Nuvalykite termometrą minkšta šluoste ir vandeniu praskiestu izopropilo alkoholiu (techniniu spiritu).
- 2 būdas** Nuplaukite termometrą šiltu muiliniu vandeniu, po to nuvalykite švaria, drėgna šluoste ir leiskite išdžiūti.
- 3 būdas** Nuvalykite termometrą minkšta drėgna spiruline servetėle (pirmenybė teikiama injekcijos skirtoms servetėlėms).

PARUOŠIMAS NAUDOTI

Įjunkite prietaisą, paspaudę ON / OFF mygtuką. Pasigirs garsinis signalas ir ekrane maždaug 2 sekundes bus rodomi visi segmentai.

WT-03: termometras rodydys kontrolinę temperatūrą 36,5°C.

WT-04, WT-06: bus rodoma paskutinį kartą užfiksuota temperatūra. Po to 1 sekundę rodoma kontrolinė temperatūra 37,0°C. Jeigu palatpos temperatūra yra <32,00 °C, ekrane bus rodoma Lo°C.

WT-03: jeigu kambario temperatūra ≥44,0°C, bus rodoma Hi°C.

WT-04, WT-06: jeigu kambario temperatūra ≥43,0°C, bus rodoma Hi°C. Kai rodoma °C, termometras paruoštas temperatūros matavimui.

WT-03: norėdami pamatyti paskutinį kartą matuotą temperatūrą, 2 sekundes palaikykite paspaudę įjungimo / išjungimo (ON/OFF) mygtuką.

WT-04, WT-06: 2 sekundes spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką kad pasirinktumėte °C arba °F. Nustatytasis vienetas °C arba °F bus rodomas ekrane iki atleidžiant mygtuką. Vėliau ekrane bus rodoma Lo °C arba Lo °F.

TEMPERATŪROS MATAVIMAS

● Pažastinis temperatūros matavimas.

Nušluostykite pažastį sausu rankšluosčiu ir pakiškite zondo antgalį po pažastimi.

⚠ **Dėmesio!** Stiprus prakaitavimas matuojant pažastinę temperatūrą gali lemti klaidingus matavimo rezultatus.

Matuodami pažastinę temperatūrą, ranką tvirtai prispauskite prie liemens, gerai uždengdami zondo antgalį ranka. Pažastinė temperatūra gali svyruoti nuo 35,2 iki 36,8°C.

Medicinos požiūriu pažastinės temperatūros matavimas nėra labai tikslus matavimo būdas. Norint gauti tikslus skaičius, reikalingas glaudus antgalio sąlytis su kūnu.

Jeigu antgalis nebus gerai priglundęs prie odos, įrenginys anksčiau paskleis garsinį signalą, o matavimo rezultatas bus mažesnis.

● Oralinis temperatūros matavimas

Padėkite zondo antgalį po liežuviu kuo arčiau poliežuvinės kišenės. Matuodamas temperatūrą, laikykite burną užčiauptą. Oralinė temperatūra gali svyruoti nuo 35,7 iki 37,3°C.

⚠ **Dėmesio!** Tam tikra veikla, pavyzdžiui, karštų arba šaltų gėrimų vartojimas, rūkymas, mankšta gali padidinti arba sumažinti temperatūrą. Todėl prieš matuojant oralinę temperatūrą svarbu atsipalaiduoti ir pabūti užčiauptus apie 5 minutes.

● Rektalinis temperatūros matavimas

Ant zondo dangtelio užtepkite vandenyje tirpau tepalo. Atsargiai įkiškite zondą (maždaug 1 cm) į tiesiąją žarną. Rektalinė temperatūra gali svyruoti nuo 36,2 iki 37,7°C.

Vidutinė matavimo trukmė taikant skirtingus matavimo būdus

	WT-03	WT-04	WT-06
Pažastinis	2-3 min.	50-60 sek.	20 sek.
Oralinis	1 min.	40-50 sek.	10-15 sek.
Rektalinis	1 min.	30-40 sek.	6-10 sek.

Dėl aprašytų savybių pažastinis temperatūros matavimas gali užtrukti ilgiau. Temperatūrai šiek tiek pakilus, įrenginys skleidžia garsinį signalą.

⚠ **Dėmesio!** Prietaiso skleidžiamas garsinis signalas dar nereiškia, kad matavimas baigtas. Tai reiškia, kad temperatūra šiek tiek pakilo. Po garsinio signalo rekomenduojama palaikyti termometrą dar 30-60 sek.

Garsinių signalų aprašymas

	WT-03	WT-04	WT-06
Trumpas	t ≥ 37,5°C	t ≥ 37,8°C	t ≥ 37,8°C
Ilgas	t <37,5°C	t <37,8°C	t <37,8°C

Norėdami pailginti baterijos naudojimo laiką, po naudojimo išjunkite prietaisą paspausdami ON / OFF mygtuką. Prietaisas išsijungia automatiškai maždaug po 10 minučių.

1. **Pastaba.** Laikykites higienos normų, rektaliniams matavimams matavimui nenaudokite to paties antgalio, kurį naudojate pažastiniams ar oraliniams matavimams. Prieš matuodami temperatūrą, negerkite karštų ar šaltų gėrimų, nesportuokite, nerūkykite ir nesimaudykite po dušu.

BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

- Vaikai turi naudoti termometru prižiūrimi suaugusiųjų.
- Matuodami temperatūrą nevaikščiokite, nebegiokite ir nekalbėkite.
- Nuvalykite prietaisą prieš ir po kiekvieno matavimo.
- Kai nesinaudojate termometru, laikykite jį apsauginiame dėkle.
- Negalima graužti zondo antgalio.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, dulkių ir drėgmės. Venkite ekstremalių temperatūrų.
- Saugokite termometrą nuo kritimo ir smūgių.
- Neardykite prietaiso, naudotojui leidžiama tik keisti bateriją.
- Jeigu ekrane pateikiamas pranešimas „ERROR“ (klaida) ir matavimas nepadedamas, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

1. Pastaba. Prietaisas gali būti sugadintas, jeigu:

- buvo naudojamas ir (arba) laikomas ne numatytoje temperatūroje arba drėgnoje aplinkoje;
- prietaisas nukrito arba buvo mechaniškai pažeistas.

⚠ **Kontraindikacijos:** nenustatytos.

BATERIJOS KEITIMAS

Skaitmeninio termometro bateriją reikia pakeisti, kai apatiniame dešiniajame ekrano kampe rodoma arba .

Kaip pakeisti bateriją

1. Atsukite baterijos dangtelio varžtą (tik WT-06).
2. Nuimkite baterijos dangtelį nuo prietaiso.
3. Pakeiskite bateriją.
4. Uždėkite baterijos dangtelį.

1. **Pastaba.** Laikykite bateriją vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nelaikykite baterijos aukštoje temperatūroje.

SPECIFIKACIJOS

	WT-03	WT-04	WT-06
Matavimo diapazonas	32,0°C - 42,9°C	32,0°C - 42,9°C	32,0°C - 42,9°C
Ekranas skiriamoji geba	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Tikslumas	Tikslumas +0,1°C matavimo diapazone 35,5°C - 42,0°C Tikslumas +0,2°C, kai matuojama temperatūra mažesnė nei 35,5°C arba didesnė nei 42,0°C		
Automatinis išjungimas	10 min. +2 min.	8 min. 40 sek. +2 min.	10 min. +2 min.
Baterija	LR41 / SR41	LR41 / SR41	LR41 / SR41
Baterijos naudojimo trukmė	Ne mažiau kaip 1 metai	Ne mažiau kaip 1 metai	Ne mažiau kaip 1 metai
Prietaiso matmenys	128,1×18,5×10,5 mm	133×21×11 mm	148×22×20 mm
Svoris (su baterija, be dėklų)	~ 10 g	~ 10 g	~ 14 g
Naudojimo sąlygos	Temperatūra: 10-40 °C; santykinė drėgmė: 30-85%		
Laikymo sąlygos	Temperatūra: -10 °C - 60 °C; santykinė drėgmė: 25% - 90%		

PAKUOTĖS TURINYS

1. Termometras
2. Baterija
3. Instrukcija ir garantinis talonas
4. Apsauginis dėklas

UTILIZAVIMAS

Prietaisas turi būti utilizuojamas laikantis galiojančių standartų, atskirai nuo buitinių atliekų. Utilizavimo tikslais būtina susisiekti su specialiomis organizacijomis, turinčiomis atitinkamą atliekų tvarkymo licenciją.

ATITIKTIS STANDARTAMS

Prietaisas atitinka EB medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. Atitikties deklaracija.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Rekomenduojama tikrinti prietaiso veikimą kas 2 metus arba jam nukritus. Kreipkitės į aptarnavimo centrą.

1. **Pastaba.** Prietaiso tikslumą galite patikrinti patys. Įpilkite indą (300-500 ml) šilto 36-41°C temperatūros vandens. Įdėkite du arba kelis termometrus, įskaitant tą, kurį norite patikrinti, ir etaloninį.

Zondo antgaliai turi būti viename lygyje, panardinti į vandenį 2-3 cm. Po 1-2 min palyginkite skaičius. Jų skirtumas turi būti ne didesnis ir ne mažesnis kaip 0,1°C.

GARANTIJA

Prietaisui suteikiama 2 metų garantija nuo pirkimo dienos. Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, baterijai, apsauginiam dėkliui ir pakuočiai. Jeigu garantiniu laikotarpiu bus aptikti gamybos defektai, defektingis prietaisas bus suremontuotas arba, nesant tokios galimybės, pakeistas nauju.

Pagaminimo data nurodyta ant prietaiso.

Pagaminimo data nurodyta prietaiso serijos numeryje SN: WWWWXXXXXX.

Pirmasis ir antrasis skaitmenys (WW) žymi pagaminimo savaitę, trečiasis ir ketvirtasis (YY) – pagaminimo metus.

1. **Prirėikus, gamintojas gali iš dalies arba visiškai modifikuoti prietaisą be išankstinio įspėjimo.**

SIMBOLIŲ REIKŠMĖS

	PRIEŠ NAUDODAMI, IDEMIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS		GAMINTOJO PAVADINIMAS
	KORPUSO APSAUGOS KLASE: IP22 (apsauga nuo didesnių nei 12,5 mm kietų kūnų skverbties. Apsauga nuo vertikaliai kritančių vandens lašų skverbties)		BF TIPO ĮRANGA
	ATSKIRAS ATLIEKŲ SURINKIMAS		PREKES KODAS
	CE ŽENKLAS		SERIJOS NUMERIS
	UNIKALUS ĮRENGINIO IDENTIFIKAVIMAS		NAUDOJIMO SĄLYGOS, TEMPERATŪRA
			LAIKYMO SĄLYGOS, TEMPERATŪRA
			MEDICINOS PRIETAISAS
			ATSTOVAS EB

Paskutinė peržiūra 2022-W12

B.Well Swiss AG
Bahnhofstr. 24, 9443 Widnau, Switzerland
www.bwell-swiss.ch

Pardavimo data:

Pardavėjo antspaudas:

