


WC-150

NAZALNI ASPIRATOR

SR Preporuke za korisnike

1. UVOD

Zahvaljujemo Vam na kupovini nazalnog aspiratora B.Well WC-150. Ovaj nazalni aspirator ima veći kapacitet u upoređenju sa tradicionalnim gumenim aspiratorima, obezbeđuje efikasnije čišćenje zapeščenosti nosa. Ovaj uređaj obezbeđuje veću sigurnost, lako rukovanje, a manja veličina uređaja daje mogućnost upotrebe kod kuće i na putu.

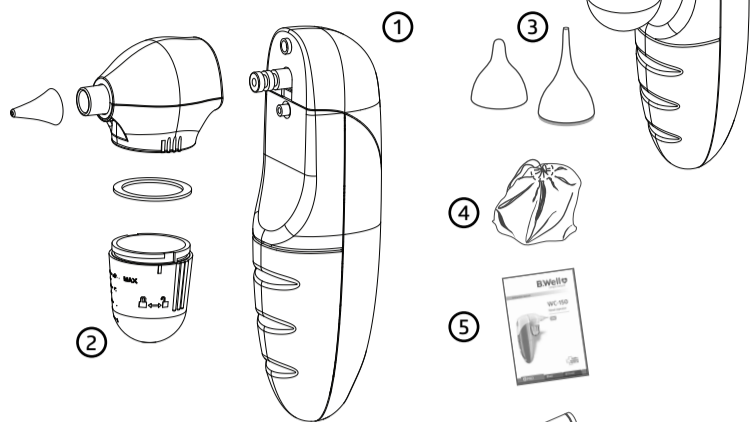

- ① Aspirator
- ② Rezervoar za skupljanje sekreta
- ③ Prsten od silikona (2 komada)
- ④ Torba za čuvanje i prenošenje aparata
- ⑤ Uputstvo za upotrebu
- ⑥ 2 baterije AA 1,5 W

2. KARAKTERISTIKE PROIZVODA

1. Veći kapacitet:

Čim ste stavili vrh aspiratora u nozdrvu, možete uređaj koristiti za duže ili kratkotrajno uklanjanje nosnog sekreta.

2. Bezbjednost

Meki prsten-vrh aspiratora ima jednostavan dizajn koji onemogućuje nastanak povreda tokom upotrebe uređaja.

3. Kompaktan i jednostavan dizajn

Uređaj je kompaktan, lagan za rukovanje. Takođe je siguran i bezbjedan za upotrebu kod beba.

4. Baterije

Za funkcioniranje uređaja potrebne su samo 2 baterije AA 1,5 W, koje se lako mijenjaju bilo kada i gdje. Indikator potrošene baterije.

5. Muzika

Umesto bučnog zvuka prilikom upotrebe, ovaj uređaj pruža jedinstvenu melodiju 12 dečjih pesama poznatih u svetu. Sve je to zahvaljujući njegovoj jedinstvenoj konstrukciji sa umontiranim zvučnikom. Melodije tih pesama doprinose komotnom osećanju deteta tokom upotrebe uređaja.

6. Čišćenje

Nakon upotrebe, nazalni sekret zadržaće se u šolji za prikupljanje sekreta. Korisnik treba samo očistiti čašicu za skupljanje sekreta, jastučić i vrh za aspiraciju u proključaloj vodi na 150°C. Odvojite vrh i modul glave od osnove aspiratora tako što ćete ga nježno povući. Odvijte čašicu za prikupljanje sekreta u smjeru kazaljke na satu. Čišćenje spoljašnjosti uređaja: obrišite uređaj čistom mekom, suvom krpom.

3. NAMJENA

Uređaj je namenjen za čišćenje nazalnog sekreta iz nosa kod djece (od 0 do 12 godina) kod kuće.

4. KONTRAIKIKACIJE

1. Vrh aspiratora od silikona se ne smije stavljati duboko u dječiju nozdrvu. Koristite nazalni aspirator kao što je preporučeno. Tokom usisivanja nozdrva mor a biti nadolje.
2. Usisivanje ne smije trajati više od nekoliko sekundi.
3. Nemojte koristiti nazalni aspirator u slučajevima nazalne iritacije ili krvarenja.
4. Ako je došlo do infekcija, povišene temperature, nadražena nosa ili krvavljenja, potražite savjet ljekara.
5. Nemojte koristiti nazalni aspirator bez silikonskog vrha ili sa oštećenom čašicom za sekret.
6. Operite prsten od silikona i rezervoar za sekret nakon svake upotrebe.
7. Operite ruke prije i nakon korišćenja nazalnog aspiratora.

5. MERE OPREZA

1. **⚠ Nemojte modifikovati ovaj uređaj bez zvanične dozvole proizvođača.**
2. Ne izlažite uređaj visokim temperaturama, visokoj vlažnosti vazduha i direktnim sunčevim zracima.
3. Izbjegavajte nepotrebno potresanje i padove uređaja.
4. NE PERITE uređaj vodom i/ili bilo kakvim tečnostima. Preporučuje se brisanje kutije mekom tkaninom i održavanje uređaja čistim.
5. Zamijenite baterije u slučaju smanjenja kapaciteta i/ili nivoa zvučnosti aparata tokom korišćenja.
6. Za vrijeme kada uređaj nije u upotrebi, preporučuje se vaditi baterije.
7. Ovaj uređaj proizvodi pulsirajući pritisak. Nastavite da pritisunate dugme za napajanje da biste pokrenuli uređaj da stvara vakuum za uklanjanje nosne sekrecije i sluzi. Ako želite prekinuti usisivanje, samo pustite dugme za napajanje.
8. Nazalni aspirator je namijenjen isključivo za čišćenje nosa i uklanjanje sekreta iz nosa. Koristite ga isključivo po namjeni. Za bilo kakve ostale medicinske upotrebe morate konsultovati ljekara.
9. Tokom upotrebe uređaja nemojte dijete sprečavati da diše, zatvarati usta i/ili gutati pljuvačku da ne bi došlo do negativnog delovanja na bubne opne zbog pojave vakuometričkog pritiska.
10. Ako se dijete tokom korišćenja uređaja osjeća loše, odmah prekinite sa postupkom i obratite se ljekaru.
11. Nemojte primjenjivati veliku silu prilikom stavljanja vrha aspiratora u nosnicu.
12. Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u kućnim uslovima. Ako je došlo do bilo kojih obolenja u nosnoj šupljini, trebate se obratiti lekaru. Aspiracioni vrh-prsten trebate čistiti nakon svake upotrebe.
13. Nazalni aspirator nije igračka. Ovaj uređaj koriste samo roditelji i odrasle osobe koji imaju mogućnost slijediti uputstva i propise iz instrukcija. Djeci je zabranjena samostalna upotreba uređaja.
14. Nazalni aspirator se NE smije koristiti kad pacijenti imaju kontraindikacije kao što su:
 - krvarenje iz nosa ili otvorene rane unutra nosa
 - Povreda glave, lica ili vrata
 - koagulopatija ili poremećaj zgušavanja krvi
15. Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. Pogrešna upotreba uređaja može da izazove sledeće posledice:
 - Mehaničku traumu
 - Nadraženje nosa / krvarenje iz nosa
 - krvavljene iz sluzokože nosa
 - Nelagodnost i bol

⚠ PAZITE: ovaj se aspirator koristi samo sa vrhovima-prstenovima za aspiraciju B.Well serije WC. Da ih nabavite, obratite se distributerima.

6. BATERIJE


1. Uklonite poklopac otvora za baterije kako je prikazano.
2. Stavite 2 baterije AA, pazite gde je plus, a gde je minus.
3. Pritisnite malo baterije, da bi ste utvrdili da su dobro smeštene.
4. Stavite poklopac natrag kako je prikazano.

⚠ PAZITE:

- Kad je u pitanju promjena baterija, pazite da da su vam baterije istog tipa, modela i kapaciteta.
- Mijenajte 2 baterije istovremeno
- Nemojte koristiti punjive baterije
- Nemojte koristiti baterije koje sadrže teške metale.
- Iskorištene baterije uništite u skladu sa zakonima Vaše zemlje. Nemojte bacati baterije u kante za otpad.

7. UPUTSTVO ZA KORISNIKE

1. Izaberite prsten od silikona u skladu sa veličinom nozdrve Vašeg deteta.
 - Široki prsten je namijenjen za uklanjanje gušćeg sekreta.
 - Uski prsten se preporučuje za uklanjanje tečnijeg sekreta.
2. Obratiti pažnju da ste dobro spojili prsten i aspirator. Prije upotrebe treba se uvjeriti da je prsten učvršćen na kutiju uređaja.

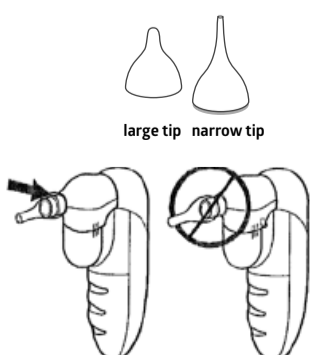

3. Stavite aspiracioni prsten u nozdrvu.

4. Pritisnite pa pridržavajte dugme za napajanje kako bi se uklonila sluz pomoću usisivanja.

⚠ PAZITE: nije obavezno da se sluz odmah vidi u rezervoaru za sekret.

Nakon svakog korišćenja trebate brzo očistiti prsten vadeći ga sa aparata.

5. Da biste bili sigurni u efikasnosti čišćenja, tokom korišćenja aparata nozdrva treba da gleda dolje. Uvijek držite prsten pod uglom od 90°. Pričekajte dok se usisivanjem ukloni sluz. Ako je neophodno, ponovite isto to u drugoj nozdrvi. Pustite dugme da se zaustavi usisivanje.

6. Pritisnite dugme za uključivanje muzike, da bi se dijete opustilo prilikom postupka.

8. UPUTSTVO ZA ČIŠĆENJE

Nakon upotrebe uređaj nazalni sekret će se zadržati u čašici za sekret. Korisnik treba očistiti samo čašicu za sekret, jastučić i aspiracioni prsten u ključaloj vodi od 150 °C.

- Odvojite prsten i modul glave od osnove aspiratora lagano ga razdvajajući.
- Odvijte čašicu za sekret okrećući je u smjeru kazaljke na satu.
- Čišćenje kutije uređaja je dozvoljeno suvom mekom tkaninom.

⚠ NOTA: Uklonite modul glave odmah nakon korišćenja uređaja. Ne stavljajte aspirator horizontalno ukoliko čašica za sakupljanje sekreta nije uklonjena. U suprotnom, tečnost iz modula glave može da uđe u uređaj i izazove štetu.

⚠ PAZITE: Nemojte koristiti za čišćenje kutije uređaja vodu i druge tečnosti. Ne koristite za to rastvarače i abrazivne proizvode.

- Čišćenje čašice za sekret, modula glave i aspiracionog prstena: perite čašicu za sekret, modul glave i aspiracioni prsten blagim rastvorom sapuna u vodi u toku od 3 minuta. Zatim isperite sve dijelove tekućom toplom vodom u toku od 3 minuta pa njih osušite na vazduhu. Kad ste sve elemente oprali, trebate još dezinficirati kuvanom vodom.

9. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Efekasni vakuumski pritisak.	400mmHg (53.3kpa)
Baterija	2 alkalne baterije 1,5 W tip AA
Nivo zvučnog pritiska	75-80 dB
Težina	250 g
Dimenzije	93,5x39,9x148 mm
Aspiracioni prsten	mekan silikon
Motor	3 W neprekidne struje
Uslove upotrebe	Temperatura: +16 °C ~ +35 °C Vlažnost: do 85% (bez kondenzacije)
Uslovi čuvanja	Temperatura: -25 °C ~ +55 °C Vlažnost: do 85% (bez kondenzacije)

10. PRIMJENJENI STANDARDI

Dostavljeni uzorak gornje opreme testiran je na CE oznaku prema europskoj direktivi i sljedećim standardima:

- Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU.

11. GARANCIJA

Garantni rok je 2 godine od dana kupovine uređaja. Garancija ne pokriva štetu nastalu nepropisnim korišćenjem, nisu pod garancijom ni baterije, torba za prenošenje, ambalaža, dodatni elementi koje se dostavljaju zajedno sa uređajem, a takođe i dijelovi koji se uobičajno habaju tokom upotrebe.

U slučaju kad je utvđeno da je uređaj oštećen, u toku trajanja garantnog roka uređaj se popravljati ili zamjenjuje, ako popravka nije moguća. Ako je to neophodno, proizvođač može mijenjati u cjelini ili djelimično elemente konstrukcije uređaja bez predhodnog obavještenja.

Datum kad je uređaj proizveden kodiran je u šifri serijskog broja svakog uređaja: prve dvije broje su broj nedelje dana, zadnje dvije su posljednje brojke godine.

12. DEŠIFRIRANJA SIMBOLA



Prije upotrebe slijedite uputstva.




Oznaka CE

IP22

Stepen zaštite kućišta uređaja od zagađivanja: IP22 (zaštićen od prodora tvrdih predmeta većih od 12,5 mm. Zaštita od prodora vertikalnih kapi vode)



Serijski broj

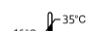

Uslovi korišćenja: temperatura od 16 °C ~ 35 °C



Uslovi čuvanja: temperatura od -25 °C ~ 55 °C



Ne sme se bacati zajedno sa komunalnim otpadom



Ime proizvođača

Posljednja revizija 2022-W08

B.Well Swiss AG

Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

www.bwell-swiss.ch