

# PRO-110 PRO-115

KOMPRESORSKI INHALATOR



## RS Uputstvo za upotrebu

### 1. UVOD

Poštovani kupče, zahvaljujemo Vam se na kupovini kompresorskog nebulajzera PRO-110 / PRO-115 kompanije B.Well. Nebulajzer je kompanije B.Well odlikuju se visokim stepenom pouzdanosti. Kompressor je snažan vazdušni tok u posebnu kamoru. Vazdušna struja raspršuje lek do najstnijih čestica. U takvom obliku preko maseke ili usnika lek stiže u disajne puteve pacienta.

Kompanija B.Well garantuje da je ovaj aparat napravljen od visokokvalitetnih materijala i odgovara važećim nacionalnim i međunarodnim bezbednosnim standardima.

S obzirom da nebulajzer spada u kategoriju medicinskih uređaja, možete da ga koristite isključivo u skladu sa uputstvima Vašeg lekara.

Molimo Vas da pre nego što počnete koristiti aparat pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i da poštujete ove preporuke!

### 2. NAMJENA KORIŠTENJA

Vaš inhalator je namijenjen za lečenje astme, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOB) i drugih respiratoričnih bolesti, čije lečenje zahteva korištenje aerosolnih lekova. Molimo Vas da se konsultujete sa Vašim lekarom i/ili farmaceutom po pitanju da li je moguće koristiti Vaš lek iz ovaj inhalator. Prilikom izbora vrste, doze i rezima lečenja pratite uputstva Vašeg lekara ili zdravstvenog radnika.

Mehanizam delovanja nebulajzera je zasnovan na dispersivno raspršivanju leka. Dobijajući konzistenciju aerosola, nebulajzer brže stiže u sve delove disajnog sistema, izazivajući terapeutski efekat. Aerodinamička veličina čestica (manje od 5 mikrona) omogućava efikasnu inhalaciju donjih disajnih puteva.

### 3. KONTRAINDIKACIJE I OGRANIČENJA ZA UPOTREBU

Strogo je zabranjeno primjenjivati kao preparate za terapiju nebulajzjerom:

- supstance i rastvore koji sadrže suspenzive čestice (dekokekcije, suspenzije, infuzije, itd.). Suspandovane čestice su značajno veća od čestica respirabilne frakcije. Njihovo korištenje u nebulajzjeru može naneti štetu zdravlju.
- rastvore koji sadrže ulje (uključujući i terpeni ulja). Čestice ulja, upadajući u donje disajne puteve, formiraju sitne membrane i povećavaju rizik od razvoja takozvane "uljne pneumonije".
- zapaljive anestetske mešavine koje su lako zapaljive u dodiru sa vazduhom, kiseonikom i azot-oksidom;
- Aromatske materije

Koristite aparat kako je opisano u ovom uputstvu i strogo u skladu sa uputstvima Vašeg lekara.

### ① MEDICINSKO UPOZORENJE

Ovo uputstvo i proizvod ne mogu zamjeniti konsultacije sa lekarom ili drugim zdravstvenim radnikom. Informacije koje se sadrže u ovom dokumentu ili ovaj proizvod ne mogu se koristiti za samostalnu dijagnostiku ili lečenje ili za izbor leka. Ako imate ili sumnjate da imate zdravstveni problem, odmah se obratite lekaru.

### 4. MERE PREDOSTROŽNOSTI

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo. Čuvajte ga sve dok budete koristili aparat. Ovaj aparat namijenjen je samo za inhalacionu terapiju. Koristite aparat u skladu sa ovim uputstvom i uputstvima Vašeg lekara. Svaka druga upotreba se smatra nepravilnom i stoga opasnom.

Aparat nije pogodan za korištenje zapaljivih anestetskih mešavina koje su lako zapaljive u dodiru sa vazduhom, kiseonikom i azot-oksidom.

Aparat nije pogodan za anesteziju i plućnu ventilaciju.

Proizvod ne smije ovdjedno stići u kontakt sa stenama i organskim strukturama. Aparat je odobren za upotrebu u nebulajzjeru.

### Pravila korištenja nebulajzera

U kompresorskom nebulajzjeru B.Well PRO-110 i PRO-115 može da se koristi čitava lepeza lekova koji se preporučuju za terapiju nebulajzjerom. Vrstu leka, dozu i režim može da prepiše samo lekar.

Koristite one vrste mlaznicu iz seta nebulajzera koje preporučuje Vaš lekar u zavisnosti od bolesti. Koristite mlaznicu za inhalaciju kroz nos, samo ako to preporuči Vaš lekar. Nikada ne uvođite mlaznicu u nos, nego stavite je što bliže nosu.

Pre upotrebe leka, pravite da li ima kontraindikacije za upotrebu u nebulajzjeru.

### ⚠️ UPOZORENJA:

- Pazljivo pratiti rok trajanja rastvora odobrenih za upotrebu. Nemojte da koristite rastvore čiji je rok trajanja istekao.
- Da bi se izbeglo širenje infekcije, ne preporučuje se upotreba istih komponenti od strane različitih pacijenata.
- Čišćenje i dezinfekcija komponenti moraju se obavljati svaki put nakon upotrebe aparat, kao i ako koristite komponente prvi put i / ili nakon dugotrajnog čuvanja. Proverite da li su delovi pravilno očišćeni i osušeni, a zatim ih čuvajte na čistom mestu.
- Komponente i aparat moraju se očistiti kako je opisano u tački 9 Čišćenje, održavanje i čuvanje ovog uputstva.
- Uvek očistite nebulajzer i njegovu komponentu od ostatka lekova i sredstava za pranje. Nikada ne ostavljajte rastvor za čišćenje u raspršivaču, usminku ili vazdušnom crevulu.
- Nebulajzer i njegove komponente ne smiju se sušiti u mikrotalasnoj peći, fenom ili drugim kućnim aparatom.
- Kada koristite nebulajzer, ne blokirajte otvore za ventilačiju aparat. Kada koristite nebulajzer, ne pokrivajte ga pokrivačem, peskicom, itd. Nikada ne postavljajte aparat na mesto gde postoji rizik od prekida pristupa vazduhu tim otvorima.
- Držite aparat van domaćina deca. Aparat sadrži sitne delove koje dete može pogutati. Detet se može upleti u kabl/vazdušnu crev i ugutiti. Deca i osobe s invaliditetom mogu koristiti aparat samo pod nadzorom odraslih osoba.
- Nemojte da aparat izlažete stetnim isparjenjima ili isparljivim materijama.
- Nemojte uljavati više od 8 ml rastvora leka u raspršivaču.
- Nemojte nagnjati raspršivač za više od 45 stepeni, ne tresite ga.
- Ne savijavajte vazdušno crevo kada čuvate ili koristite nebulajzer.
- Izbegavajte padove i snažne udare aparat.
- Nemojte blokirati poklopac vazdušnog filtera.
- Aparat je odobren samo za ljudsku upotrebu. Koristite ga samo za predviđenu svrhu.

### Opasnost od strujnog udara

Koristite samo originalne delove i komponente.

• Uređaj nije zaštićen od prodora tečnosti, nemojte ga vlažiti.

• Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.

• Ne izlažite uređaj uticaju prirodnih faktora.

• Pre čišćenja aparat mora se usagistiti i isključiti iz mreže.

• Isključite aparat iz mreže odmah po završetku terapijske sesije.

• Nemojte odvajati raspršivač dok uređaj radi.

• Tokom upotrebe postavite aparat na ravnu i stabilnu površinu.

• Nemojte da stavljate aparat u tečnost.

• Ne koristite aparat ažle je oštećen kabl za napajanje ili utikač. Zamena kabla za napajanje mora da se odvija samo u ovlašćenom servisnom centru.

• Ne dozvoljavajte da kabli za napajanje dode u dodir sa vrućim površinama.

• Ne povlačite kabli ili aparat da biste ga isključili iz napajanja.

• Ovaj aparat mora da bude popravljen samo u servisnim centrima koje preporučuje kompanija B.Well. Zbog nepoštovanja ovog usluga aparat može biti nebezbedan.

Na pravilno funkcionisanje aparatu može uticati elektromagnetna interferencija koja prelazi granice navedene u evropskim standardima.

Ako na ovaj aparat utiče drugi električni uređaj, prebacite ga na drugo mesto i uključite u drugu utičnicu.

U slučaju kvara pravljite poglavlje „11 Tablica mogućih kvarova“.

Ne otvarajte kućište aparata.

Pre priključivanja aparatu na električnu mrežu pravite da li se radni napon električne mreže podudara sa naponom navedenim na aparatu. Vrednost radnog napona mreže prikazana je na dnu nebulajzera. Ako radni napon naveden na dnu nebulajzera se ne podudara sa naponom električne mreže, obratite se stručnjaku kako bi se problem rešio.

Generalno, korištenje produžnih kablova i podslopkova se ne preporučuje. Ako je njihova upotreba ipak neophodna, koristite samo one vrste koje odgovaraju sigurnosnim standardima.

Aparat mora biti sastavljen u skladu sa ovim uputstvom. Nepravilno sklanjanje može prouzrokovati štetu ljudima, životinja ili stvarima. U ovom slučaju prizvođač nije odgovoran za nastalu štetu.


Ako odlučite da više ne koristite aparat, morate ga odložiti u skladu sa važećim propisima. Postavljajte aparat na takav način da se može isključiti.

### 5. KOMPONENTE

(1) Kućište aparata



(2) Prekidac

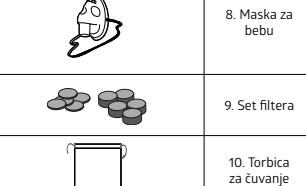

(3) Priklučak za vazdušno crevo

7. Maska za decu

(4) Poklopac filtera

1. Maska za decu

(5) Držač raspršivača

2. Maska za decu

(6) Otvor za ventilaciju

3. Set filtera

4. Usnik

4. Usnik

5. Mlaznica za inhalaciju kroz nos

5. Mlaznica za inhalaciju kroz nos

6. Maska za odraslu osobu

6. Maska za odraslu osobu

7. Otvor za ventilaciju

7. Otvor za ventilaciju

8. Maska za bebu

8. Maska za bebu

9. Set filtera

9. Set filtera

10. Torbicica za čuvanje komponenti

10. Torbicica za čuvanje komponenti

11. Uputstvo za upotrebu

11. Uputstvo za upotrebu

12. Nalepnice

12. Nalepnice

13. Sustav za čuvanje

13. Sustav za čuvanje

14. Sustav za čuvanje

14. Sustav za čuvanje

15. Sustav za čuvanje

15. Sustav za čuvanje

16. Sustav za čuvanje

16. Sustav za čuvanje

17. Sustav za čuvanje

17. Sustav za čuvanje

18. Sustav za čuvanje

18. Sustav za čuvanje

19. Sustav za čuvanje

19. Sustav za čuvanje

20. Sustav za čuvanje

20. Sustav za čuvanje

21. Sustav za čuvanje

21. Sustav za čuvanje

22. Sustav za čuvanje

22. Sustav za čuvanje

23. Sustav za čuvanje

23. Sustav za čuvanje

24. Sustav za čuvanje

24. Sustav za čuvanje

25. Sustav za čuvanje

25. Sustav za čuvanje

26. Sustav za čuvanje

26. Sustav za čuvanje

27. Sustav za čuvanje

27. Sustav za čuvanje

28. Sustav za čuvanje

28. Sustav za čuvanje

29. Sustav za čuvanje

29. Sustav za čuvanje

30. Sustav za čuvanje

30. S