

PRO-35

Automatisk överarm
Blodtrycksmätare

1. INLEDNING

Tack för att du köpte B.Well blodtrycksmätare för överarmen PRO-35. Denna enhet är utformad för bekväm och enkel användning och ger snabb och tillförlitlig mätning av systoliskt och diastoliskt blodtryck, samt hjärtfrekvens med hjälp av oscilometrisk mätningsskärmetod. PRO-35 är en helautomatisk, digital blodtrycksmätare för överarmen.

Viktiga fördelar med PRO-35

- Uppdaterad IntellectClassic-teknik använder oscilometrisk mätning under deflation för snabbt, exakt och smärtfritt resultat.
- Teknik för detektering av oregelbunden puls.
- Minne av 30 mätningar.
- Trafikljusindikering enligt European Society of Hypertension (ESH).
- Fläktformat anatomisk manschett för arm, tvättbar.
- Möjlighet att använda nätdapter.
- Denna enhet är lätt att använda och har bevisats ge utmärkt precision i kliniska studier.

2. KLASSIFICERING AV BLODTRYCKSVÄRDEN


Tabell för klassificering av blodtrycksvärden (mmHg) enligt European Society of Hypertension (ESH)

Intervall	Systoliskt blodtryck	Diastoliskt blodtryck	Åtgärder
Grad 3: svår hypertoni	Högre eller lika med 180	Högre eller lika med 110	Sök snabbt läkare
Grad 2: måttligt hypertoni	160-179	100-109	Rådfråga omedelbart din läkare
Grad 1: lätt hypertoni	140-159	90-99	Rådfråga din läkare
Hög normal	130-139	85-89	Rådfråga din läkare
Normal	Lägre än 130	Lägre än 85	Självtest
Optimal	Lägre än 120	Lägre än 80	Självtest

❗ **OBS!** Visa de uppmätta värdena för din läkare. Använd aldrig resultaten av dina mätningar för att ändra doserna av läkemedel som har ordinerats av din läkare.

3. INNEHÅLL OCH DISPLAYINDIKATORER

	Systoliskt tryck
	Diastoliskt tryck
	Pulsfrekvens
	Symbol för hjärtslag
	Nollsökande symbol
	Batterier håller på att ta slut
	Symbol för lågt batteri
	Symbol för detektering av oregelbunden puls
	Indikation av blodtrycksnivå

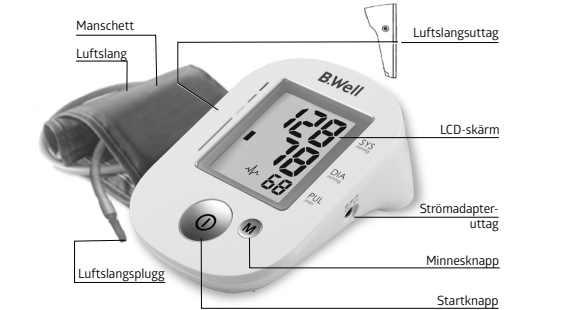

4. AVSEDD ANVÄNDNING

Den digitala automatiska blodtrycksmätaren är avsedd att användas av sjukvårdspersonal eller hemmavid och är ett icke-invasivt blodtrycksmätningssystem som är avsett att mäta diastoliskt och systoliskt blodtryck och puls hos en vuxen individ med hjälp av en icke-invasiv teknik varvid en uppblåsbar manschett lindas runt överarmen. Manschettomkretsen är begränsad till 22 cm-42 cm.

5. KONTRAINDIKATIONER

Det är olämpligt för personer med allvarlig arytmi att använda den digitala automatiska blodtrycksmätaren.

6. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Läs all information i användningsmanualen och eventuell annan litteratur som finns i lådan innan du använder enheten.
- Håll dig stilla, lugn och vila i 5 minuter före blodtrycksmätning.
- Manschetten ska placeras på samma nivå som ditt hjärta.
- Under mätningen ska du varken tala eller röra på kroppen och armen.
- Mätning på vänster arm för varje mätning.
- Slappna alltid av i minst 1 till 1,5 minuter mellan mätningarna för att blodcirkulationen i armen ska återhämta sig. Långvarig överupplåsning (manschettryck över 300 mmHg eller bibehålls över 15 mmHg under längre tid än 3 minuter) av blåsan kan orsaka ekkymos i armen.
- Rådfråga din läkare om du har några tvivel om nedanstående omständigheter:
 - Aplicering av manschetten över ett sår eller inflammation sjukdomar;
 - Aplicering av manschetten på alla extremiteter där det föreligger intravaskulär åtkomst eller behandling, eller en arteriovenös (A-V) shunt;
 - Aplicering av manschetten på armen på sidan av en mastektomi;
 - Samtidig användning med annan medicinsk övervakningsutrustning på samma lem;
 - Behöver kontrollera blodcirkulationen hos användaren.
- Δ Denna digitala automatiska blodtrycksmätare är utformad för vuxna och bör aldrig användas på spädbarn eller små barn. Rådfråga din läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal före användning på äldre barn.
- Använd inte denna enhet i ett fordon i rörelse, detta kan leda till felaktig mätning.
- Blodtrycksmätningar som bestäms av denna mätare är likvärdiga med dem som erhålls av en utbildad observatör genom auskultationsmetod med manschett/stetoskop, inom de gränser som föreskrivs av American National Standard Institute, elektroniska eller automatiska sfygmomanometrar.
- Information om potentiella elektromagnetiska eller andra störningar mellan blodtrycksmätaren och andra enheter tillsammans med råd om undvikande av sådana störningar, se del ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITETSFÖRKLARING.
- Använd inte manschetten på annat sätt än vad som tillhandahålls av tillverkaren, annars kan det medföra risk för biokompatibilitet och resultera i mätfel.

- Δ Monitorn kanske inte kan uppfylla sina prestandaspecifikationer eller orsaka en säkerhetsrisk om den lagras eller används utanför de angivna temperatur- och fuktighetsintervallen i specifikationerna.
- Δ Använd inte manschetten med andra smittsamma person så att korsinfektion undviks.
- Observera att ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.
- Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsanläggning. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationen. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
 - Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
 - Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
 - Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
 - Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
- Om denna kompletta uppsättning inte inkluderade nätdaptern kan den köpas separat. Använd endast adaptern AD-155. AC-adaptorn som har utgången DC 6.0V 600mA och uppfyller kraven i IEC 60601-1/EN 60601-1/UL 60601-1 och IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2/UL 60601-1-2. Någon annan adaptermodell bör ej användas.

7. INSTALLATIONS- OCH DRIFTSRUTINER

7.1. Batteriladdning


- Öppna batteriluckan på mätarens baksida.
- Ladda fyra AAA-batterier. Var uppmärksam på polariteten.
- Stäng batteriluckan.
- När du har installerat batterierna eller stängt av skärmen visar LCD-skärmen inte någonting. Nu är mätaren avstängd.
 - Om LCD-skärmen visar batterisymbolen färdiga. Vänligen byt ut alla batterier mot nya.
 - Efter att LCD-skärmen visar batterisymbolen skärmen inte öppnas. Vänligen byt ut alla batterier mot nya.
 - Uppladdningsbara batterier är inte lämpliga för denna mätare.
 - Ta ur batterierna om mätaren inte kommer att användas på en månad eller mer för att undvika skador från batteriläckage.
 - Undvik att få batteriavätska i ögonen. Om det skulle komma i ögonen, skölj omedelbart med rikligt med rent vatten och kontakta läkare.

⚠ **Monitorn, batterierna och manschetten måste bortskaffas i enlighet med lokala bestämmelser när de har använts.**

7.2. Använda en nätdapter

- Anslut nätdaptern till ett 100-240 V, 50/60 Hz eluttag.
 - Anslut DIN-kontakten till uttaget på instrumentets högra sida.
- Ingen ström tas från batterierna när nätdaptern är ansluten till instrumentet.

⚠ **WARNING:** Om du behöver nätdaptern kan du köpa den separat. Använd endast nätdaptern AD-155. Användning av andra adaptern kan göra din garanti ogiltig.


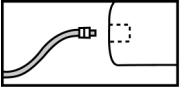


7.3. Ansluta manschetten till mätaren

Sätt i luftslangspuggen ordentligt i luftslangsuttaget på sidan av mätaren. Se till att pluggen är helt införd för att förhindra luftläckage under användning. Δ Undvik kompression eller begränsning av anslutningsslangen under mätningen, vilket kan orsaka uppblåsningsfel eller skadliga skador på grund av kontinuerligt manschettryck.

7.4. Applicera manschetten

- Dra manschettens ände genom medaljögeln (manschetten är redan förpackad så här), vrid den utåt (bort från kroppen) och dra åt den och stäng kardborrebandet.
- Placera en manschett runt en bar arm 1-2 cm högre än en armbågen.
- Placera i sittande ställning en handflata framför dig på en slät yta, till exempel på ett bord. Placera en manschett på en hand så att dess underkant befinner sig 1-2 cm ovanför en armbågsveck. Den röda taggen (artärmark) ska finnas sig över armbågsvecket.
- Manschetten måste omsluta armen tätt, annars blir resultatet av mätningen felaktigt. Det rekommenderas inte att manschettplaceras över kläder.

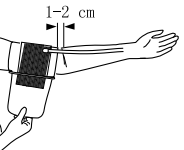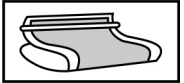

7.5. Utföra en mätning

Före mätningen:

- Undvik att äta och röka, samt alla former av ansträngning direkt före mätningen.
- Alla dessa faktorer påverkar mätresultatet. Försök att hitta tid att slappna av genom att sitta i en fåtölj i en lugn atmosfär i ungefär tio minuter före mätningen.
- Ta bort alla eventuella plagg som sitter tätt över överarmen.
- Mät alltid på samma arm.
- Försök att utföra mätningarna regelbundet vid samma tid på dagen, eftersom blodtrycket förändras under dagens gång.


Mätning i bekväm sittande ställning

- Sitt med fötterna platta på golvet och kors ta benen.
- Placera handflatan uppåt framför dig på en plan yta såsom ett skrivbord eller bord.
- Manschettens mittdel ska befinna sig i nivå med hjärtat



Mätning i ligande ställning

- Lägg dig på rygg.
- Placera vänster arm rak längsmed din sida och med handflatan upp.
- Manschetten ska placeras på samma nivå som ditt hjärta.

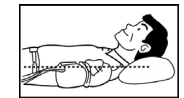

Vanliga felkällor:

- Rörelse under mätning.
- Armartären ligger betydligt lägre (högre) än hjärtat.
- Manschetten passar dig inte i storlek.
- Lös manschett eller en sidledes utstickande luftficka.


❗ Obs!

- Vid upprepade mätningar ansamlas blod i respektive arm, vilket kan leda till felaktiga resultat. Korrekt utförda blodtrycksmätningar bör därför först upprepas efter en 1 minuters paus.

7.6. Läs av blodtrycket (Bild 1, 1-1, 1-2)

När du har applicerat manschetten och kroppen är i en bekväm position trycker du på "START"-knappen. Ett pip hörs och alla vinstingstecken visas för självtest. Se bild 1. Kontakta servicecentret om segment saknas.

- Därefter börjar mätaren söka nolltryck. Se bild 1-1.
- Monitorn blåser upp manschetten tills tillräckligt tryck har byggts upp för en mätning. Därefter släpper mätaren långsamt ut luft från manschetten och utför mätningen. Slutligen kommer blodtrycket och pulsfrekvensen att beräknas och visas på LCD-skärmen. Oregelbundna hjärtslag symbol (om någon) kommer att blinka. Se bild Bild 1-2.

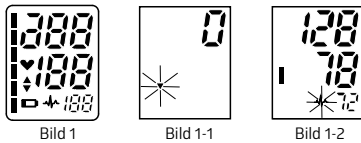

- Efter mätning stängs mätaren av automatiskt efter 1 minut utan drift. Alternativt kan du trycka på "START"-knappen för att stänga av mätaren manuellt.
- Under mätningen kan du trycka på "START"-knappen för att stänga av mätaren manuellt.

- ❗ **Obs!** Kontakta sjukvårdspersonal för tolkning av tryckmätningar.
- ❗ **Obs!** Monitorn kan memorera 30 resultat. Om du byter batterier sparas resultaten.

7.7. Detektion av oregelbunden puls

Symbolen visar att en viss oregelbundenhet i puls upptäcktes under mätningen. Resultatet kan variera från ditt normala blodtryck. I regel är detta ingen anledning till oro, men om symbolen mer frekvent (t.ex. flera gånger i veckan vid mätningar som utförs dagligen) eller om den plötsligt visas mer frekvent än vanligt rekommenderar vi att du informerar din läkare. Det finns två villkor för att symbolen för detektion av oregelbunden puls ska visas.

- Variationskoefficienten (CV) för pulsperioden >25 %.
- Avvikelsen mot intilliggande pulsperiod 2,014 s och antalet sådana pulser upptar mer än 53 procent av det totala antalet pulser.

7.8. Trafikljusindikering


De färgade staplarna på displayens vänstra kant visar inom vilket intervall de angivna blodtrycksvärdena ligger. Beroende på stapelns höjd ligger avläsningsvärdet antingen inom normalområdet (grönt), gränsområdet (gul och orange) eller farområdet (rött).

Klassificeringen motsvarar de sex intervall i tabellen som definieras av ESH och beskrivs i tabellen i punkt 2. Rekommendationerna från European Society of Hypertension (ESH) gör det möjligt att diagnostisera och behandla hypertoni mer effektivt och dessa strider inte mot Världshälsoorganisationens rekommendationer.

Indikation för ett "normalt" blodtryck	Indikation för ett blodtryck "på gränsen"	Indikation för ett "farligt" blodtryck

7.9. Visa lagrade resultat

- Efter mätningen kan du granska mätningarna i den aktuella minnesbanken genom att trycka på knappen "MEM". Nu visar LCD-skärmen mängden resultat i den aktuella minnesbanken. Se bild 2. Om inget resultat lagras kommer LCD-skärmen att visa noll som Bild 2-1.

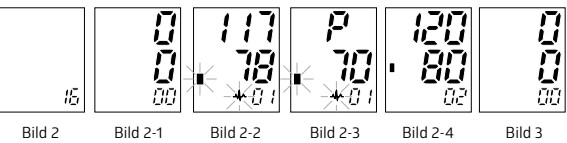

- Seadan visas det senaste resultatet. Se bild 2-2. Därefter visas blodtrycket och pulsfrekvensen separat. Oregelbundna hjärtslag symbol (om någon) kommer att blinka. Se bild 2-2 och 2-3. Tryck på knappen "MEM" igen för att granska nästa resultat. Se bild 2-4. Genom att upprepa gången trycka på knappen "MEM" visas de resultat som har uppmäts tidigare. När de lagrade resultaten visas stängs mätaren av automatiskt efter 1 minut utan drift. Du kan också trycka på knappen "START" för att stänga av skärmen manuellt.

7.10. Radera mätningar från minnet

När något resultat (förutom genomsnittlig avläsning av de tre senaste resultaten) visas och knappen "MEM" hålls intryckt i tre sekunder raderas alla resultat i den aktuella minnesbanken efter tre "pip". LCD-skärmen visar bild 3, tryck på knappen "MEM" eller "START", skärmen stängs av.

7.11. Teknisk larmbeskrivning

Monitorn visar "H!" eller "Lo" som tekniskt larm på LCD-skärmen utan fördröjning om det fastställda blodtrycket (systoliskt eller diastoliskt) ligger utanför det nominella intervall som anges i avsnittet SPECIFIKATIONER. I detta fall bör du rådfråga en läkare eller kontrollera om din operation brömt mot instruktionerna. Det tekniska larmtillståndet (utanför märkområdet) är förställt på fabriken och kan inte justeras eller inaktiveras. Detta larmtillstånd tilldelas låg prioritet enligt IEC 60601-1-8. Det tekniska larmet är inte låst och behöver ingen återställning. Signalen som visas på LCD-skärmen försvinner automatiskt efter ca 8 sekunder.

7.12. Felsökning (1)

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
LCD-skärmen visar symbolen för lågt batteri	Lågt batteri	Byt batterier
LCD-skärmen visar "Er 0"	Trycksystemet är instabilt före mätning	
LCD-skärmen visar "Er 1"	Misslyckades med att upptäcka systoliskt tryck	Rör dig inte och försök igen
LCD-skärmen visar "Er 2"	Underlitenhet att detektera diastoliskt tryck	
LCD-skärmen visar	Pneumatisksystemet är blockerat eller manschetten är för stram under uppblåsningen	Applcira manschetten korrekt och försök igen
LCD-skärmen visar "Er 4"	Pneumatiskt systemläckage eller manschetten är för lös vid uppblåsningen	
LCD-skärmen visar "Er 5"	Manschetttryck över 300 mmHg	
LCD-skärmen visar "Er 6"	Mer än 3 minuter med manschettryck över 15 mmHg	Mät igen efter fem minuter. Om mätaren fortfarande är onormal, kontakta den lokala distributören eller fabriken
LCD-skärmen visar "Er 7"	EEPROM åtkomstfel	
LCD-skärmen visar "Er 8"	Fel vid kontroll av enhetsparameter	
LCD-skärmen visar "Er A"	Parameterfel för tryckgivare	
Inget svar när du trycker på knappen eller laddar batteriet	Felaktig drift eller stark elektromagnetisk störning	Ta ut batterierna i fem minuter och sätt sedan tillbaka alla batterier

7.13. Felsökning (2)

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
LCD-displayen visar onormalt resultat	Manschettpositionen var inte korrekt eller så var den inte ordentligt åtdragen	Applcira manschetten korrekt och försök igen
	Kroppsställningen var inte korrekt under testet	Granska avsnittet "KROPPSHÅLLNING UNDER MÄTNING" i instruktionerna och testa igen
	Talar, utför arm- eller kroppsförelser, är arg, upphetsad eller nervös under testning	Testa igen när det är lugnt och utan att tala eller röra dig under testet
	Oregelbundna hjärtslag (arytmi)	Det är olämpligt för personer med allvarlig arytmi att använda denna blodtrycksmätare

8. UNDERHÅLL

- Δ Tappa inte denna mätare eller utsatt den för kraftiga slag och stötar.
- Δ Undvik hög temperatur och solarisering. Sänk inte ner mätaren i vatten eftersom detta kan leda till skador på mätaren.
- Om denna mätare förvaras nära frysnivå, låt den aklimatisera sig till rumstemperatur före användning.
- Δ Försök inte demontera denna mätare.
- Det rekommenderas att prestandan kontrolleras vartannat år eller efter reparation. Kontakta servicecentret.
- Rengör mätaren med en torr, mjuk trasa eller en mjuk trasa som har pressats ur val efter fuktning med vatten, utspädd desinfektionsalkohol eller utspädd rengöringsmedel.
- Användaren kan inte utföra underhåll på någon av mätarens komponenter. Kretsscheman, listor över komponentdelar, beskrivningar, kalibreringsanvisningar eller annan information som hjälper användarens lämpligt kvalificerade tekniska personal att reparera de delar av utrustningen som kan repareras.
- Monitorn kan bibehålla säkerhets- och prestandaegenskaperna under minst 10 000 mätningar eller under tre års tid, och manschettens integritet upprätthålls efter 1 000 cykler av öppning/stängning.
- Det rekommenderas att manschetten desinficeras 2 gånger i veckan vid behov (till exempel på sjukhus eller i klinik). Torka av manschettens insida (sidan kommer i kontakt med huden) med en mjuk trasa som pressats ur efter fuktning med etylalkohol (75-90%) och torka sedan manschetten genom att låta den luftas. Manschettskyddet kan handtvättas i 30°C. Ta först bort den pneumatiska kammaren genom ett speciellt tekniskt hål i manschettskyddet.

⚠ **WARNING!** Luftkammaren kan inte tvättas! Överdraget går inte att stryka! Det tekniska hålet behöver inte sys upp!

9. SPECIFIKATIONER

- Produktnamn: Blodtrycksmätare, modell: PRO-35
- Klassificering: Internat driven, typ BF tillämpad del, IPX0, ingen AP eller APG, Kontinuerlig drift
- Maskinstorlek: 87 mm x 122 mm x 53 mm (3 7/16" x 4 13/16" x 2 3/32")
- Manschettens omkrets: 22 cm-42 cm (8 21/32 tum ~16 17/32 tum) eller 22 cm-32 cm (8 21/32 tum ~12 19/32 tum) (beroende på enhetens uppsättning)
- Vikt: ca 200 g (exkl. batterier och manschett)
- Mätmetod: oscilometrisk metod, automatisk luftupplåsning och mätning
- Minnesvolym: 30 resultat
- Strömkälla: DC 6V 600mA, batterier: 4*1.5V STORLEK AAA nätdapter (tillval)
- Måtområde: manschettryck: 0-300 mmHg, systoliskt: 60-260 mmHg, diastoliskt: 40-199 mmHg, puls: 40-180 slag/minut
- Noggrannhet: tryck: ±3 mmHg, puls: ±5%
- Omgivningstemperatur vid drift: 10°C-40°C (50°F-104°F)
- Omgivningsfuktighet vid drift: ±85 % RH
- Omgivningstemperatur vid lagring och transport: -20°C-50°C (-4°F-122°F)
- Omgivningsfuktighet vid lagring och transport: ±85 % RH
- Omgivningstryck: 80KPa-105KPa
- Batteritid: ca 270 gånger
- Blodtrycksmätare inställd: M-L storlek fläktformat manschett (omkrets för överarm 22-42 cm) eller M storlek fläktformat manschett (omkrets för överarm 22-32 cm) (beroende på val av enhet), en förvaringsväska, AAA batterier - 4 stycken, nätdaptern (om det ingår i valet), bruksanvisningen.

- ❗ **Obs!** Dessa specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

10. TILLÄMPADE STANDARDER

Den digitala automatiska blodtrycksmätaren överensstämmer med nedanstående standarder: IEC 60601-1:2005/EN 60601-1: 2006/AC: 2010 (Medicinsk elektrisk utrustning - Del 1: Allmänna krav på grundläggande säkerhet och väsentliga prestanda). IEC60601-1-2:2007/EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010 (Medicinsk elektrisk utrustning - Del 1-2: Allmänna krav på grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda - Säkerhetsstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav och tester). IEC 80601-2-30: 2009-Cor.2010 (Medicinsk elektrisk utrustning - Del 2-30: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och väsentlig prestanda hos automatiserade icke-invasiva blodtrycksmätare). EN 1060-1: 1995 + A1: 2002 + A2: 2009 (Icke-invasiva blodtrycksmätare - Del 1: Allmänna krav), EN 1060-3: 1997 + A1: 2005 + A2: 2009 (Icke-invasiva sfygmomanometrar - Del 3: Kompletterande krav för elektromekaniska blodtrycksmätningssystem).

11. SYMBOLINFORMATION

	MANÖVERHANDBOKEN MÅSTE LÄSAS (Technets bakgrundsfärg: blå Technets grafiska symbol: vit)		REF	NAMN ARTIKELNUMMER
	VARNING			SERIENUMMER
	ANVÄNDA DELAR AV BF_TYP (Manschetten är en använd del av BF-typ)			CE-märkning (0044) ÖVERENSSTÄMMER MED MD03/42/EEG-KRAV
	MJÖJÖSKYDD - Avfall av elektriska produkter ska inte bortskaffas tillsammans med hushållsavfall. Vänligen återvänd när det finns anläggningar för det. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning.			LKSTORREKONTAKTENS POLARITET DRIFTSFÖRHÅLLANDE, TEMPERATUR 10°C - 40°C
	TILLVERKARENSNAMN			FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDE, TEMPERATUR -20°C - 50°C
	HOUSING INGRESS PROTECTION RATE			HÅLL TORRT
	MEDICINSK UTRUSTNING			UNIK ENHETSIDENTIFIERING
				EG-REPRESENTANT

12. GARANTINFORMATION

Garantitiden är 3 år från inköpsdatum för mätare och 1 år för manschett och adapter. Denna garanti gäller inte för skador som har orsakats av felaktig användning, eller för batteri och förpackningar. När ett tillverkningsfel upptäckts under garantitiden repareras en felaktig enhet eller, om reparation är omöjlig, byts den ut mot en annan. Garantin omfattar inte komponenter och förbrukningsvaror som är föremål för slitage eller för batterier, påsar och produktens förpackning.

Tillverkningsdatum anges i ett serienummer: WYYYYXXXXX. Tillverkaren får vid behov helt eller delvis byta ut enheter utan föregående meddelande.

13. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITETSFÖRKLARING

Tabell 1
För all ME-UTRUSTNING och ME-SYSTEM

Vägledning och tillverkarens försäkrän – elektromagnetiska utsläpp		
PRO-35 är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljön som anges nedan. Kunder eller användaren av PRO-35 ska säkerställa att den används i en sådan miljö.		
Utsläppstest	Efterlevnad	Elektromagnetisk miljövägledning
RF-utsläpp CISPR 11	Grupp 1	PRO-35 använder RF-energi endast för sin interna funktion. Därför är dess RF-utsläpp mycket låga och orsakar sannolikt inga störningar i närliggande elektronisk utrustning
RF-utsläpp CISPR 11	Klass B	PRO-35 är lämplig för användning i alla anläggningar, inklusive bostäder och de som är direkt anslutna till det offentliga lågspänningsnätet som försörjer byggnader som används för hushållsändamål
Harmoniska utsläpp IEC 61000-3-2	Klass A	
Spänningsfluktuationer/ flimmerutsläpp IEC 61000-3-3	Efterlevver	